

Manuel d'utilisation Chaise portoir

Réf. SBRAN14_O



I. Descriptif :

Dimension du produit déplié (L x l x H) : 84 x 52 x 92 cm
Dimension du produit replié : 91 x 52 x 19 cm
Dimension de l'emballage : 96 x 54 x 20 cm
Poids net: 9kg/ Poids brut: 11kg
Capacité de charge : maximum 159kg

II. Recommandation d'utilisation :

Cette chaise portoir pour évacuation et transfert possède une structure haute résistance en alliage d'aluminium. Il s'agit d'une installation idéale pour le personnel d'urgence qui doit transférer le patient pour monter et descendre les escaliers. Les deux roues arrière fixes permettent de déplacer les patients sur la plupart des surfaces avec un minimum d'effort. Le brancard assure la sécurité du patient pendant le processus de transport grâce à ses 3 pièces de sangles de retenue avec boucle à dégagement rapide. Sous l'avant du brancard, il y a deux tiges de levage flexibles. La civière peut être pliée et permet d'économiser de l'espace dans la voiture de l'ambulance.

III. Précautions d'utilisation :



Lors du transport de patients, il est essentiel de verrouiller correctement les sangles de sécurité.
Ne pas tordre le brancard lors de sa manipulation.

IV. Entretien :

Nettoyage avec un désinfectant de surface.
Veiller régulièrement à ce qu'aucune partie ne soit manquante.


V. Stockage et transport :

Entreposer dans un endroit à l'abri de l'humidité, ce qui pourrait entraîner la corrosion du produit.
Les véhicules de transport courants peuvent transporter ce produit.

	Fabricant
	Représentant utilisé dans l'union européenne
	Importateur
	Distributeur
REF	Référence Holtex
LOT	Numéro de lot
	Date de fabrication
	Dispositif médical



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co.,Ltd.
NO.7th, MiddleXinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215600, China

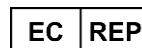

SUNGO EUROPE B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel
Netherlands

User Manual Stair Stretcher

Réf. SBRAN14_O



I. Technical Parameters:

Product Size (L×W×H): 84×52×92cm
 Folding Size (L×W×H): 91×52×19cm
 Packing Size (L×W×H): 96×54×20cm
 N.W: 9kg G.W.: 11kg
 Loading Bearing: ≤159kg

II. How to use:

This evacuation and transfer chair features a high-strength aluminum alloy frame. It is ideal for emergency personnel who need to transfer patients up and down stairs. The two fixed rear wheels enable patients to be moved over most surfaces with minimum effort. The stretcher ensures patient safety during the transport process thanks to its 3-piece retaining straps with quick-release buckles. Under the front of the stretcher are two flexible lifting rods. The stretcher can be folded to save space in the ambulance car.

III. Cautions:





When carrying patients with this stretcher, be sure to lock tightly the fender locking device & fasten the safety belt for safety sake.
 In general operation, be careful not to torn out the stretcher surface.

IV. Maintenance:

Keep clean as routine (incl. sterilization).
 Often check if any parts loose or not.


V. Storage & transportation:

Store this product in the place of damp proof & non-corrosion.
 Common transporting vehicle can carry this product.

	Manufacturer
EC REP	Authorised representant of the European Union
	Importer
	Distributor
REF	Holtex reference
LOT	Lot number
	Manufacturing date
MD	Medical device



Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co.,Ltd.
 NO.7th, MiddleXinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
 Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215600, China

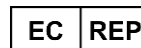

SUNGO EUROPE B.V.
 Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
 2909VA Capelle aan den IJssel
 Netherlands