

Manuel d'utilisation

Brancard catastrophe, pliable en 2, avec tête et roulettes, bleu

Réf. SBRAN07_B



I. Descriptif :

Dimension du produit déplié (L x l x H) : 185 x 50 x 24cm

Dimension du produit plié (L x l x H) : 92 x 50 x 11cm

Dimension de l'emballage : 98 x 54 x 12cm

Poids net : 7 kg/ Poids brut: 9kg

Capacité de charge : maximum 159 kg

II. Recommandation d'utilisation :

Cette civière pliable en 2, avec roues et stabilisateurs, est principalement utilisée pour le transport de patients souffrant de fractures. Constituée d'une structure aluminium de haute résistance et d'un tissu étanche, le dos de cette civière peut être relevée jusqu'à 60°. Légère et facile à transporter, ces diverses fonctionnalités permettent au patient d'être placé rapidement et délicatement sur une table d'opération ou sur un lit.

Approuvé pour son efficacité, ce brancard est à la fois adapté aux ambulances et aux hôpitaux en ce qui concerne le transport de personnes blessées ou malades lors de situations d'urgence.

III. Précautions d'utilisation :

Lors du transport de patients, il est essentiel de verrouiller correctement les sangles de sécurité.

IV. Entretien :

Veiller à un bon entretien au quotidien

Nettoyage avec un désinfectant de surface.

Veiller régulièrement à ce qu'aucune partie soit manquante.

V. Stockage et Transport :

Entreposer dans un endroit à l'abri de l'humidité, ce qui pourrait entraîner la corrosion du produit.

Les véhicules de transport courants peuvent transporter ce produit.

	Fabricant
EC REP	Représentant autorisé dans l'union européenne
	Importateur
	Distributeur
REF	Référence Holtex
LOT	Numéro de lot
	Date de fabrication
MD	Dispositif médical



ZHANGJIAGANG XIEHE Medical Apparatus & Instruments Co.,Ltd.
 NO.7th, Middle Xinzha Road, Sigang Village,
 Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215600, China




SUNGO EUROPE B.V.
 Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
 2909VA Capelle aan den IJssel
 The Netherlands

User Manual

Emergency stretcher, foldable in 2, with headrest and wheels, blue

Réf. SBRAN07_B

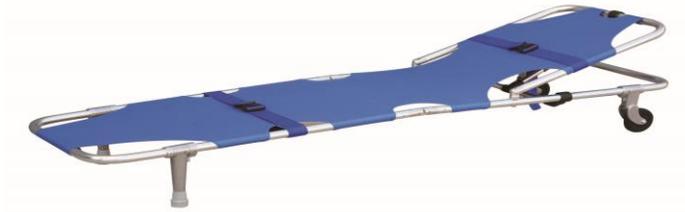

I. Technical parameters:

Product size (L x W x H): 185 x 50 x 24cm

Folding size (L x W x H): 92 x 50 x 11cm

Packing size (1pcs): 98 x 54 x 12cm

N.W.: 7kg G.W.: 9kg

Load bearing: ≤159kg

II. How to use:

This separable first-aid folding stretcher is mainly used for transporting patients with fractures. Both ends of the stretcher have hinge-type clutches to separate the stretcher into a right and left part. This allows for the patient to be quickly and gently placed onto the stretcher, operation table or bed.

Approved by clinic practice, this item is suitable for ambulance, hospital battlefield gym, to carry the wounded & patients. It also can be used in general operation.

III. Cautions:

When carrying patients with this stretcher, be sure lock tightly fasten the safety belt for safety sake.

In general operation, be careful not to out torn the stretcher surface.

IV. Maintenance:

Keep clean as routine (incl. sterilization).

Often check if any parts loose or not.

V. Storage & transportation:

Store this product in the place of damp proof & non-corrosion.

Common transporting vehicle can carry this product.

	Manufacturer
EC REP	Authorised representant of the European Union
	Importer
	Distributor
REF	Holtex reference
LOT	Lot number
	Manufacturing date
MD	Medical device



ZHANGJIAGANG XIEHE Medical Apparatus & Instruments Co.,Ltd.

NO.7th, Middle Xinzha Road, Sigang Village,

Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215600, China



SUNGO EUROPE B.V.

Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,

2909VA Capelle aan den IJssel

The Netherlands