

Manuel d'utilisation

Brancard pliable en 4 (alliage d'aluminium)

Réf. SBRAN08_O



I. Descriptif :

Dimension du produit déplié (L x l x H) : 208 x 54,5 x 13,5cm

Dimensions du produit plié (L x l x H) : 105 x 18 x 10cm

Dimension de l'emballage : 108 x 19 x 12cm

Poids net: 4.7kg/ Poids brut: 6kg

Capacité de charge : maximum 159kg

II. Recommandation d'utilisation :

Ce brancard pliant est constitué d'un alliage aluminium de haute résistance et d'un tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration. Facile à transporter et à stocker, cette civière à balancier peut être pliée dans sa longueur et dans sa largeur.

Approuvé pour son efficacité, ce brancard est à la fois adapté aux ambulances et aux hôpitaux en ce qui concerne le transport de personnes blessées ou malades lors de situations d'urgence.

III. Précautions d'utilisation :

Lors du transport de patients, il est essentiel de verrouiller correctement les sangles de sécurité.

IV. Entretien :

Veiller à un bon entretien au quotidien.

Nettoyage avec un désinfectant de surface.

Veiller régulièrement à ce qu'aucune partie ne soit manquante.

V. Stockage et Transport :


Entreposer dans un endroit à l'abri de l'humidité, ce qui pourrait entraîner la corrosion du produit.

Les véhicules de transport courants peuvent transporter ce produit.

	Fabricant
	Représentant autorisé dans l'union européenne
	Importateur
	Distributeur
REF	Référence Holtex
LOT	Numéro de lot
	Date de fabrication
	Dispositif médical



ZHANGJIAGANG XIEHE Medical Apparatus & Instruments Co.,Ltd.
NO.7th, Middle Xinzha Road, Sigang Village,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215600, China

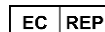

SUNGO EUROPE B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel
The Netherlands

User Manual

Folding stretcher in 4 (aluminum alloy)

Réf. SBRAN08_O



I. Technical parameters:

Product Size (L×W×H) : 208×55×13cm
Folding Size (L×W×H) : 104×17×9cm
Carton Size (2pcs) :: 108×18.5×18cm
N.W : 4.7kg G.W.: 11kg
Loading Bearing: ≤159kg

II. How to use:

The folding stretcher with outrigger is made of high strength aluminum alloy material and the waterproof leather materials. This stretcher with outrigger can be folded in length and width, easy for transportation and storage. The orange fabric is fire proof, water proof, anti-cracking and easy to clean.

Approved by clinic practice, this item is suitable for ambulance, hospital battlefield gym, to carry the wounded & patients. It also can be used in general operation.

III. Cautions:

When carrying patients with this stretcher, be sure lock tightly fasten the safety belt for safety sake.

In general operation, be careful not to out torn the stretcher surface.

IV. Maintenance:

Keep clean as routine (incl. sterilization).
Often check if any parts loose or not.


V. Storage & transportation:

Store this product in the place of damp proof & non-corrosion.
Common transporting vehicle can carry this product.

	Manufacturer
	Authorised representant of the European Union
	Importer
	Distributor
REF	Holtex reference
LOT	Lot number
	Manufacturing date
	Medical device



ZHANGJIAGANG XIEHE Medical Apparatus & Instruments Co.,Ltd.
NO.7th, Middle Xinzha Road, Sigang Village,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215600, China

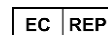

SUNGO EUROPE B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel
The Netherlands