



Spengler



TEMPO EASY

CE 0123

JXB-182

Thermomètre infrarouge sans contact

Non-contact Infrared Thermometer

Termómetro por infrarrojos sin contacto

ثرموميتر مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء بدون

تلامس Kosketukseton infrapunakuumemittari

FR	Manuel utilisateur	P.2
EN	User's manual	P.22
ES	Manual	P.42
AR	دليل المستخدم	P.62
FI	Käyttöopas	P.80

WWW.SPENGLER.FR

**SPENGLER MEDICAL**

Adresse: 30 rue Jean de Guiramand,
13290 Aix-en-Provence, FRANCE

**Guangzhou Berrcom Medical Device Co., Ltd**

Address: No.38 Huanzhen Xi Road, Dagang
Town, Nansha, 511470 Guangzhou, Guangdong,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86(20)34938449
Email: service@berrcom.com

**Shanghai International Holding Corp. GmbH
(Europe)**

Address: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg,
Germany

CE 0123

NOTE

Lisez attentivement ce manuel avant utilisation et suivez toutes les instructions. Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure.

Vérifiez le fonctionnement de l'appareil conformément à ce manuel avant chaque utilisation et n'utilisez cet appareil que s'il est en bon état de fonctionnement.

TABLE DES MATIÈRES

I. UTILISATION PRÉVUE.....	4
II. PRÉCAUTIONS D'USAGE.....	4
III. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT.....	6
IV. DESCRIPTION DU PRODUIT.....	6
V. UTILISATION DU THERMOMÈTRE INFRAROUGE SANS CONTACT	6
VI. MISE EN ROUTE ET PARAMÉTRAGE.....	7
VII. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	9
VIII. PILES	10
IX. CONTENU DE LA BOÎTE	10
X. NETTOYAGE ET DESINFECTION.....	11
XI. DÉPANNAGE	12
XII. SYMBOLES ET DÉFINITIONS.....	13
XIII. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	15
XIV. GARANTIE/SAV	18
XV. MISE AU REBUT	19



• VERSION FRANÇAISE	P. 2
• ENGLISH VERSION	P. 22
• VERSIÓN ESPAÑOLA	P. 42
62.ص	• النسخة العربية
• SUOMENKIELINEN VERSIO	S.80

I. UTILISATION PRÉVUE

Cet appareil est un thermomètre infrarouge destiné à mesurer la température frontale des nourrissons et des adultes sans contact avec le corps humain. Il peut être utilisé par les consommateurs dans les environnements domestiques ainsi que par les médecins dans les cliniques.



II. PRECAUTIONS D'USAGE

- N'utilisez ce thermomètre qu'après avoir lu et compris le mode d'emploi.
- N'utilisez ce thermomètre que pour l'usage spécifique décrit dans le mode d'emploi. Toute utilisation abusive annulera la garantie.
- Ce thermomètre peut être utilisé à des fins professionnelles ou pour un usage personnel à domicile.
- L'utilisation de ce thermomètre ne remplace pas la consultation d'un médecin. Ne faites pas d'autodiagnostic ou d'automédication sur la base des mesures sans consulter votre médecin. En particulier, ne commencez pas à prendre un nouveau médicament ou ne modifiez pas le type et/ou le dosage d'un médicament existant sans l'accord préalable de votre médecin.
- En particulier, ne prenez pas de nouveaux médicaments ou ne modifiez pas le type et/ou le dosage d'un médicament existant sans consulter votre médecin et obtenir son accord.
- Ce thermomètre doit être utilisé par des adultes et être placé hors de portée des enfants en bas âge.
- Veillez à ce que les enfants n'utilisent pas cet appareil sans surveillance ; certaines pièces sont suffisamment petites pour présenter un risque d'étouffement ou d'ingestion.
- Si ce thermomètre est stocké dans un endroit plus frais ou plus chaud que celui où il est utilisé, veuillez le placer dans l'endroit où il fonctionne pendant au moins 30 minutes avant de prendre la mesure.
- Après une activité physique, un bain ou un séjour à l'extérieur, attendez environ 30 minutes avant de mesurer la température sur votre front.
- Pour garantir une mesure précise, vous ne devez utiliser ce thermomètre qu'à l'intérieur, lorsque la température ambiante est comprise entre 10°C (50°F) et 40°C (104°F).
- Avant et après chaque utilisation, le thermomètre doit être nettoyé conformément aux instructions de ce manuel afin d'éviter d'éventuelles infections bactériennes.
- Ne pas exposer ce thermomètre à des chocs électriques.


- Ne pas exposer ce thermomètre à des conditions de températures extrêmes supérieures à 55° (131°) ou inférieures à -20° (-4°).
- Ne pas utiliser ce thermomètre dans une humidité relative supérieure à 85%.
- Ne placez pas ce produit dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à une température élevée, à une forte humidité, à une poussière excessive ou dans un endroit où il pourrait entrer en contact avec un gaz ou un liquide corrosif. N'utilisez pas ce produit dans l'environnement ci-dessus.
- Ne faites pas tomber ce thermomètre.
- Ne pas toucher le verre du capteur infrarouge avec les doigts, car il est extrêmement fragile et peut provoquer des blessures.
- N'utilisez pas ce thermomètre s'il est endommagé.
- N'ouvrez pas ce thermomètre. Il contient de petites pièces qui peuvent être avalées par les enfants.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides de nettoyage, et ne laisser aucun liquide pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
- Retirez les piles si vous ne souhaitez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée ; sinon, il y a un risque de fuite des piles.
- Tenez le thermomètre à l'écart des champs électromagnétiques produits par des objets tels que les fours à micro-ondes, les soudeurs à arc ou les chauffages à induction.
- L'appareil ne doit plus être réutilisé lorsqu'il atteint la durée de vie prévue (5 ans, à partir de la date de production) de l'appareil. Voir le chapitre XV pour la mise au rebut de l'appareil.
- Les composants électriques et les piles contiennent des métaux lourds ou des produits chimiques qui peuvent être nocifs pour la santé.
- Vous devez contacter le fabricant ou votre revendeur pour les questions suivantes :
 - Si une erreur se produit ou si le thermomètre est endommagé : N'essayez PAS de réparer le thermomètre vous-même, car cela annulerait la garantie. Ne confiez les réparations qu'à des partenaires de service agréés. Le FABRICANT fournira sur demande des schémas de circuit, des listes de composants, des descriptions, des instructions d'étalonnage ou d'autres informations qui aideront le PERSONNEL DE SERVICE à réparer les parties de l'ÉQUIPEMENT EM désignées par le FABRICANT comme pouvant être réparées par le PERSONNEL DE SERVICE.
 - Si vous avez besoin d'aide pour installer, utiliser ou entretenir le thermomètre.
 - Si vous avez des opérations ou des événements inattendus à signaler.

III. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Quel que soit l'état de la matière composant un corps, il émet des radiations, dont l'intensité est fonction de sa température. Le thermomètre infrarouge TEMPO EASY peut donc mesurer la température d'une personne grâce à l'énergie qu'elle dégage. La sonde de température externe en analysant et enregistrant la température ambiante en permanence permet de recueillir les mesures. Par conséquent, dès que l'opérateur approche le thermomètre du corps et déclenche le capteur de rayonnement, la mesure s'effectue instantanément par détection de la chaleur infrarouge émise par le flux sanguin artériel. Le résultat de la mesure de la température corporelle est alors obtenu sans interférence avec la chaleur environnante.

Remarque : la température corporelle de référence pour le thermomètre infrarouge sans contact est la température axillaire.

IV. DESCRIPTION DU PRODUIT

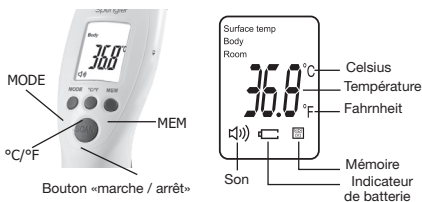

V. UTILISATION DU THERMOMÈTRE INFRAROUGE SANS CONTACT

COMMENT PRENDRE UNE TEMPERATURE

Viser le FRONT, côté temporal droit, à une distance d'environ 3 cm à 5 cm, appuyez sur la touche de mesure du thermomètre : la température s'affiche instantanément.

Pour que la température enregistrée soit fiable et stable, veuillez vous conformer aux prescriptions suivantes :

- Ramenez l'ensemble de la chevelure vers l'arrière
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas de sueur sur le front
- Evitez les flux d'air (ex : lunettes à oxygène, climatisation, etc.)

- Respecter un intervalle d'une minute entre deux mesures pour chaque individu.
- Si la température est susceptible de varier il est conseillé de laisser le Tempo Easy à température ambiante durant 30 minutes avant de s'en servir.



Pour obtenir des résultats fiables :

COMMENT PRENDRE UNE TEMPERATURE

Viser le FRONT, côté temporal droit, à une distance d'environ 3 cm à 5 cm, appuyez sur la touche de mesure du thermomètre : la température s'affiche instantanément.

Pour que la température enregistrée soit fiable et stable, veuillez vous conformer aux prescriptions suivantes :

- Ramenez l'ensemble de la chevelure vers l'arrière
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas de sueur sur le front
- Évitez les flux d'air (ex : lunettes à oxygène, climatisation, etc.)
- **N'essayez PAS de prendre la température d'un individu en dirigeant l'appareil vers une partie du corps autre que le front (bras, jambes, torse, etc...).**
- **Ne déplacez PAS le thermomètre avant que le résultat final ne s'affiche.**
- **Ne prenez PAS la température d'une personne à proximité d'un courant d'air (vent, climatiseur, ventilateurs).**
- **Ne PAS prendre la température d'une personne peu après qu'elle ait pratiqué une activité physique intense, pris un bain, un médicament, mangé ou bu, ou qu'elle ait appliqué une compresse froide ou chaude sur son front.**
- **Ne prenez PAS la température d'une personne lorsque les conditions ambiantes ont changé de manière significative. Laissez l'appareil s'adapter au changement significatif de la température ambiante dû à un changement d'environnement pendant au moins 30 minutes avant de prendre la mesure.**
- **Attendez au moins 3 à 5 secondes entre les mesures.**
- **Nous recommandons d'effectuer trois mesures sur le front. Si les résultats des trois mesures sont différents, utilisez celle dont la valeur est la plus élevée.**

VI. MISE EN ROUTE ET PARAMÉTRAGE

1. Mettre les piles en place.
2. A la première utilisation ou lors de l'insertion de nouvelles piles, attendre environ 10-15 minutes le préchauffage de l'appareil.
3. Viser le front à une distance de 3 à 5 cm, appuyez sur la touche de mesure : la température s'affiche instantanément.
4. Avant de prendre la température assurez-vous que le front n'est recouvert ni de cheveux ni de sueur.

5. METTRE L'APPAREIL SOUS TENSION

Une fois sous tension appuyez sur la touche «SCAN» ; une seconde après, l'écran s'allume, entre en mode attente et présente les caractères “---°C” ou “----°F”.

Appuyer de nouveau sur la touche «SCAN» pour obtenir instantanément les mesures. 30 secondes après son inutilisation, l'appareil s'arrête.

6. Une fois sous tension, paramétrer le mode
 - a. Une fois la touche «MODE» appuyée, l'écran affichera : Corps...°C
 - b. Après avoir appuyé de nouveau sur «MODE», l'écran affichera : Temp. surface ...°C
 - c. Après une nouvelle pression sur «MODE», l'écran affichera : Pièce ...°C

7. MÉMOIRE DE DONNÉES

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton « MEM » : la dernière température s'affichera et vous pourrez consulter les 32 dernières mesures.

8. EFFACEMENT DE LA MÉMOIRE

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton « MEM » et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes ; toutes les données de la mémoire seront alors effacées. Appuyez ensuite à nouveau sur le bouton « MEM » ; l'écran affichera « CLr ».

9. FONCTION D'ALERTE DE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

En mode température corporelle, si la température mesurée est supérieure ou égale à 38 °C, l'appareil émettra un bip continu.



NOTE : LA TEMPÉRATURE DE SURFACE ET LA TEMPÉRATURE AMBIANTE NE SONT PAS À USAGE MÉDICAL.

La température de surface diffère de la température corporelle. Pour obtenir la température du corps, vous devez utiliser le «mode température du corps».

Utilisez le mode température de surface pour mesurer la température d'un biberon/d'une eau de bain et le mode température ambiante pour mesurer la température de la pièce.

10. Une fois sous tension, la pression sur “” active ou désactive le bip sonore.

Lorsque l'écran affiche “ON”, le bip est activé. Lorsqu'il affiche “OFF”, il est désactivé.

11. REMPLACEMENT DES PILES

Ecran : lorsque l'écran LCD affiche “Piles”, les piles sont déchargées.


VII. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction	Spécifications
Piles	Piles AA DC 3V x 2
Sonde de température	Sonde à infrarouge
Distance de mesure	3 cm - 5 cm (1.2in - 2in)
Plage de mesure	Mode température corporelle : 32,0°C ~ 43,0°C (89,6°F ~ 109,4°F) Mode température de surface : 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) Mode température ambiante : 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Précision de mesure	Mode température corporelle : 32.0°C ~ 34.9°C (89.6°F ~ 94.8°F) : ±0.3°C (±0.6°F) 35.0°C ~ 42.0°C (95°F ~ 107.6°F) : ±0.2°C (±0.4°F) 42.1°C ~ 43.0°C (107.8°F ~ 109.4°F) : ±0.3°C (±0.6°F)
Répétabilité clinique	≤0.2°C (0.4°F)
Résolution de l'écran	0.1°C (0.1°F)
Temps de mesure	1 seconde
Mémoire	32 enregistrements
Conditions d'utilisation	Température ambiante : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Hygrométrie : ≤85%RH Pression atmosphérique : 700 ~ 1060 hPa
Conditions de stockage et transport	Température ambiante : -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) Hygrométrie : ≤ 95%RH Pression atmosphérique : 700 ~ 1060 hPa
Poids	Approx. 80g (Sans les piles)
Dimensions	Approx. 175 x 50 x 52 mm (L x l x H)
Durée de vie	5 ans
Arrêt automatique	≤ 30 secs
Site de mesure	Front
Site corporel de référence	Aisselle
Mode d'opération	Mode adaptatif

VIII. PILES

1. REMPLACEMENT DES PILES

Procédure : Ouvrez le couvercle et remplacez les piles usagées en prenant soin de respecter la polarité. Toute erreur de polarité peut endommager votre TEMPO EASY et compromettre sa garantie. Ne jamais insérer de piles rechargeables. N'utiliser que des piles à usage unique.

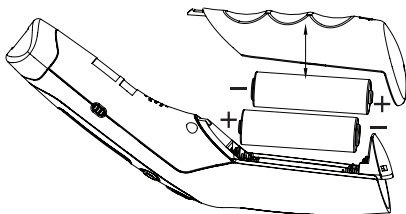

2. ELIMINATION DES PILES

Pour protéger l'environnement, éliminez les piles vides dans des sites de collecte appropriés, conformément aux réglementations nationales ou locales. La méthode d'élimination est définie au chapitre XV.

Notes sur la manipulation des piles



- Si votre peau ou vos yeux entrent en contact avec le liquide de la batterie, rincez la zone affectée avec de l'eau et consultez un médecin.



- **Risque d'étouffement !** Les jeunes enfants peuvent avaler les piles et s'étouffer. Conservez les piles hors de portée des jeunes enfants.
- Si une pile a coulé, mettez des gants de protection et nettoyez le compartiment de la pile avec un chiffon sec.
- Protéger les piles de la chaleur excessive.



Risque d'explosion ! Ne pas jeter les piles au feu.

- N'utilisez que des piles identiques ou équivalentes.
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Ne pas démonter, fendre ou écraser les piles

IX. CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 x Thermomètre
- 1 x Manuel d'utilisation
- 2 x Piles LR06 AA

X. NETTOYAGE ET DESINFECTION

Le thermomètre est un dispositif réutilisable pour plusieurs patients et les instructions de nettoyage et de désinfection ont été validées. Veuillez suivre les instructions pour nettoyer/désinfecter votre thermomètre avant de l'utiliser.

Nettoyage:

- 1) Utilisez un coton-tige humidifié avec de l'eau chaude ou un détergent neutre pour nettoyer le boîtier du thermomètre et la sonde de mesure afin d'éliminer les taches ou l'huile.
- 2) Inspecter visuellement le thermomètre après le processus de nettoyage, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de salissures ou de taches. S'il s'avère que le dispositif n'est pas visuellement propre à la fin de l'étape de nettoyage, vous devez soit répéter les étapes de nettoyage précédentes, soit éliminer le dispositif en toute sécurité afin qu'un dispositif visiblement souillé ne soit pas réutilisé.

Désinfection:

- 1) Désinfectez le boîtier du thermomètre et la sonde pendant 30 secondes à l'aide d'un coton-tige ou d'un chiffon non poussiéreux trempé dans de l'éthanol à 75%.
- 2) Répétez les étapes ci-dessus au moins 3 fois, puis essuyez la surface et la sonde avec un chiffon propre, et attendez environ 1 minute pour le séchage après le processus de désinfection.

Note:

- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur du thermomètre.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs, de diluants ou de benzène pour le nettoyage, et n'immergez jamais le thermomètre dans l'eau ou dans d'autres liquides de nettoyage.
- Veillez à ne pas rayer la surface de la lentille de la sonde et de l'écran.
- Si l'inspection visuelle révèle une détérioration inacceptable (corrosion, décoloration, piqûres, fissures), l'appareil ne doit plus être utilisé et doit être jeté.
- Si le thermomètre a été utilisé chez des patients, veuillez l'inspecter visuellement pour déterminer s'il y a des taches ou de l'huile sur le boîtier ou la sonde après chaque utilisation, et suivez les instructions de nettoyage et de désinfection pour nettoyer votre thermomètre.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Nettoyez le thermomètre régulièrement, en général une fois par mois.
- Si la pointe de la sonde est endommagée, veuillez contacter le centre de maintenance.
- Si nécessaire, vous pouvez le nettoyer correctement en fonction de la saleté réelle du produit.
- Si vous n'utilisez pas ce produit pendant une longue période (plus de 2 mois), remplacez toutes les piles.
- Conservez le thermomètre dans un endroit sec, à l'abri de la poussière et de la contamination et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Ne pas utiliser de piles autres que celles mentionnées, ne pas utiliser de piles rechargeables, ne pas jeter au feu.
- Ne pas exposer le thermomètre à la lumière du soleil ou à l'eau.
- Ne pas utiliser le thermomètre de manière brusque. Les chutes et les chocs violents endommageront l'appareil.

Calibration:

Ce thermomètre est étalonné au moment de sa fabrication et nécessite un contrôle de sécurité annuel, conformément aux normes applicables aux thermomètres médicaux à infrarouge. Si, à un moment quelconque, vous avez des doutes quant à la précision des mesures, veuillez contacter immédiatement le revendeur. L'étalonnage de ce produit nécessite un équipement d'étalonnage adapté ; sans cela, il ne peut pas être étalonné de manière autonome.

XI. DÉPANNAGE


Pour tout problème survenant durant l'utilisation du thermomètre, reportez-vous au guide de dépannage afin de tenter d'y remédier. Si le problème persiste, contactez votre revendeur.

L'ECRAN AFFICHE LE MESSAGE HI

En mode température corporelle, le thermomètre affiche «HI» si la température de l'objet mesuré est supérieure à 43°C (109,4°F).

En mode température de surface, le thermomètre affiche «HI» si la température mesurée de l'objet est supérieure à 60°C (140°F).

En mode température ambiante, le thermomètre affiche «HI» si la température ambiante mesurée est supérieure à 40°C (104°F).

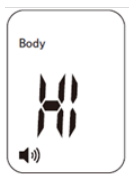

L'ECRAN AFFICHE LE MESSAGE LO

En mode température corporelle, le thermomètre affiche «Lo» si la température mesurée de l'objet est inférieure à 32°C (89,6°F). En mode température de surface, le thermomètre affiche «Lo» si la température mesurée de l'objet est inférieure à 0°C (32°F). En mode température ambiante, le thermomètre affiche «Lo» si la température ambiante mesurée est inférieure à 0°C (32°F).



Ce message s'affiche pour diverses raisons. Veuillez vous référer à la liste des principaux problèmes ci-dessous :

Cas d'affichage du message LO	Recommandations
Prise de température gênée par la présence de cheveux ou de sueur.	Assurez-vous que la surface à mesurer est bien dégagée et sèche.
Prise de température gênée par un flux d'air ou une variation brutale de la température ambiante.	Veillez à ne pas vous trouver dans l'axe d'un flux d'air pour éviter de provoquer des interférences avec le système infrarouge.
Prises de température trop rapprochées, le thermomètre n'a pas eu le temps de se réinitialiser.	Attendre 3 à 5 secondes au moins entre les prises ; un intervalle de 15 secondes est recommandé.
La distance de mesure est trop importante.	Veillez respecter la distance recommandée (entre 3 à 5 cm environ).

XII. SYMBOLES ET DÉFINITIONS

Symbole	Définition
 Spengler TEMPO EASY	Marque
	Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi pour des mises en garde cruciales qui à titre d'avertissements et de précautions ne peut pas, pour diverses raisons, être présenté sur le dispositif médical lui-même.
	Équipements de type BF
	Courant continu
IP22	Degré de protection contre les infiltrations d'eau et de particules 2 Protégé et contre les corps étrangers solides de 12,5 mm Ø et plus 2 Protection contre les chutes d'eau verticales lorsque le BOÎTIER est titré jusqu'à 15°

Symbole	Définition
	Jetez le produit usagé au point de collecte pour le recyclage conformément aux réglementations locales.
	Consultez le mode d'emploi
	Numéro de lot
	Fabricant
	Dispositif médical
	Symbole du représentant autorisé européen, indique expressément le nom et l'adresse du représentant autorisé européen après le symbole.
	Le marquage CE certifie que le produit est conforme aux exigences essentielles des réglementations de l'UE sur les dispositifs médicaux.
	Numéro de modèle
	Fabriqué en Chine
	Importateur
	Distributeur
	Fragile, manipuler avec soin
	Garder au sec
	Limite de température
	Limite d'humidité
	Position de l'emballage
	Ne pas empiler plus de 6 cartons
	Référence du produit
	Numéro de série
	Identifiant unique du dispositif
	Date de fabrication
	Jetez l'emballage de manière respectueuse de l'environnement.

XIII. DECLARATION NDE CONFORMITE

L'APPAREIL MÉDICAL ÉLECTRIQUE ou le SYSTÈME MÉDICAL ÉLECTRIQUE est adapté aux soins de santé à domicile et en milieu clinique.

Déclaration : Le thermomètre infrarouge sans contact modèle JXB-182 a été testé conformément aux recommandations du rapport technique IEC TS 60601-4-2 : Appareils électromédicaux – Partie 4-2 : Guide et interprétation – Immunité électromagnétique ; performance des équipements électromédicaux et des systèmes électromédicaux.

Avertissement : Ne pas approcher d'un appareil chirurgical HF actif et d'une salle protégée contre les FR d'un système médical électrique d'imagerie par résonance magnétique où l'intensité des perturbations électromagnétiques est élevée.

Avertissement : évitez d'utiliser cet appareil à proximité de où simultanément à d'autres, car cela pourrait nuire à son bon fonctionnement. Si une telle utilisation est nécessaire, cet appareil ainsi que les autres doivent être surveillés pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement.

Avertissement : L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet appareil risque d'entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet appareil et nuire à son bon fonctionnement.

Avertissement : Les équipements de communication RF portables (y compris les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm (12 po) de toute partie de l'appareil Thermomètre, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Sans quoi, il est possible que les performances de cet appareil se dégradent.

1. Toutes les instructions nécessaires au maintien de la SÉCURITÉ DE BASE et des PERFORMANCES ESSENTIELLES relatives aux perturbations électromagnétiques pendant la durée de vie estimée. Les équipements de communication RF portatifs et mobiles pouvant affecter les performances du Thermomètre, il conviendra d'éviter les fortes interférences électromagnétiques pendant l'utilisation, notamment la proximité de téléphones portables, d'un four à micro-ondes, etc.

2. Directives et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques et immunité

Tableau 1

Directives et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques	
Essai de contrôle des émissions	Conformité
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1
Émissions RF CISPR 11	Classe B
Émissions harmoniques CEI 61000-3-2	Sans objet
Émissions dues aux fluctuations de tension/papillotement CEI 61000 3-3	Sans objet

Tableau 2

Directives et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique		
Test d'immunité	CEI 60601-1-2 Niveau d'essai	Niveau de conformité
Décharge électrostatique (ESD) CEI 61000-4-2	±8 kV au contact ±2 kV, ±4 kV, ±8kV, ±15 kV à l'air	±8 kV au contact ±2 kV, ±4 kV, ±8kV, ±15 kV à l'air
Transitoires électriques rapides/Salve CEI 61000-4-4	Sans objet	Sans objet
Surtension CEI 61000-4-5	Sans objet	Sans objet
Creux de tension, coupures brèves et variations de tension sur les lignes d'entrée d'alimentation CEI 61000-4-11	Sans objet	Sans objet
Champs magnétiques à la fréquence du réseau CEI 61000-4-8	30A/m 50Hz/60Hz	30A/m 50Hz/60Hz
RF par conduction CEI 61000-4-6	Sans objet	Sans objet
RF rayonnées CEI 61000-4-3	10V/m 80MHz -2,7GHz 80% AM à 2kHz	10V/m 80MHz - 2,7GHz 80% AM à 2kHz
REMARQUE UT correspond à la tension secteur c.a. avant l'application du niveau d'essai.		

Tableau 3

Directives et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique			
Modulation	Modulation	Distance (m)	NIVEAU D'ESSAI D'IMMUNITÉ (V/m)
Modulation d'impulsion 18 Hz	1.8	0.3	27
FM±5 kHz de déviation 1 kHz sinusoïdal	2	0.3	28
Modulation d'impulsion 217 Hz	0.2	0.3	9
Modulation d'impulsion 18 Hz	2	0.3	28
Modulation d'impulsion 217 Hz	2	0.3	28
Modulation d'impulsion 217 Hz	2	0.3	28
Modulation d'impulsion 217 Hz	0.2	0.3	9

Tableau 3

Directives et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique			
RF rayonnées CEI 61000-4-3 (Spécifications d'essai pour l'IMM UNITÉ DE L'ACCÈS SUR EN CEINTE aux équipements de communication sans fil RF)	Fréquence des essais (MHz)	Bande (MHz)	Service
	385	380-390	TETRA 400
	450	430-470	GMRS 460 FRS 460
	710	704-787	Bande LTE 13,17
	745		
	780		
	810	800-960	GSM800/900, TETRA800, CDMA850, bande LTE5
	870		
	930		
	1720	1700-1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; Bande LTE 1,3,4,25; UMTS
	1845		
	1970		
	2450	2400-2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7
	5240	5100-5800	WLAN 802.11 a/n
	5500		
	5785		

Tableau 4

Directives et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique				
RF rayonné CEI 61000-4-39 (Techniques d'essai et de mesure - Champs rayonnés à proximité - Essai d'immunité)	Test de fréquence	Modulation	CEI 60601-1-2 niveau de test (A/m)	Conformité (A/m)
	30 kHz	CW	8	8
	134,2 kHz	Modulation d'impulsion 2.1 kHz	65	65
	13,56 MHz	Modulation d'impulsion 50 kHz	7,5	7,5

XIV. GARANTIE/SAV

Conformément à notre politique d'amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et optiques sans préavis.

Conditions de garantie et de réparation

Garantie : 24 mois.

Veuillez contacter votre revendeur ou le centre de service en cas de réclamation au titre de la garantie. Si vous devez renvoyer l'appareil, veuillez joindre une copie de votre facture et indiquer la nature du défaut.

Les conditions de garantie suivantes s'appliquent :

- 1 La période de garantie pour les produits Spengler est de 24 mois à partir de la date d'achat. En cas de recours à la garantie, la date d'achat doit être prouvée à l'aide du ticket de caisse ou de la facture.
2. Les défauts de matériel ou de fabrication sont éliminés gratuitement pendant la période de garantie.
3. Les réparations effectuées dans le cadre de la garantie ne prolongent pas la période de garantie de l'appareil ou des pièces de rechange.
4. Les éléments suivants sont exclus de la garantie :
 - a. Tous les dommages dus à un traitement inapproprié, par exemple le non-respect des instructions de l'utilisateur.
 - b. Tous les dommages dus à des réparations ou à des manipulations effectuées par le client ou par des tiers non autorisés.
 - c. Les dommages survenus pendant le transport entre le fabricant et le consommateur ou pendant le transport vers le centre de service.
 - d. Les accessoires soumis à une usure normale.
5. Les responsabilités pour les pertes directes ou indirectes causées par l'appareil sont exclues même si les dommages causés à l'appareil sont acceptés en tant que réclamation au titre de la garantie.

• GUANGZHOU BERRCOM MEDICAL DEVICE

CO., Ltd décline expressément toute garantie de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

• En aucun cas, Spengler n'aura d'obligation ou de responsabilité pour toute perte de profit ou tout dommage consécutif, indirect, spécial, punitif ou contingent, quel qu'il soit, concernant les réclamations faites par un client, un consommateur ou un autre utilisateur.

• Dans le cas où des lois applicables impose des garanties, des conditions ou des obligations qui ne peuvent être exclues ou modifiées, le présent paragraphe s'applique dans toute la mesure permise par ces lois.

XV. MISE AU REBUT



Il est demandé de ne pas jeter les DEEE avec les déchets municipaux non triés et de les collecter séparément. Conformément à la directive 2012/19/UE et aux réglementations nationales en matière d'élimination des anciens appareils électriques et électroniques, veuillez noter que ces articles doivent être éliminés d'une manière spéciale au sein de l'Union européenne (UE). Ces réglementations exigent le recyclage/la mise au rebut des anciens appareils électriques et électroniques dans le respect de l'environnement. Ces appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ceci a été exprimé par l'icône de la « poubelle barrée ».



Le thermomètre infrarouge sans contact (modèle JXB-182) contient des piles et des déchets électroniques recyclables. Pour protéger l'environnement, ne le jetez pas avec les ordures ménagères en tant que déchet municipal non trié, mais collectez-le séparément et apportez-le à un centre de collecte local approprié.


Le thermomètre infrarouge sans contact (modèle JXB-182) est classé comme petit équipement (5e catégorie) conformément à l'ANNEXE IV de la directive 2012/19/UE.

Avant de mettre au rebut votre thermomètre infrarouge sans contact (modèle : JXB-182), veuillez retirer les piles du thermomètre infrarouge sans contact (modèle : JXB-182) et mettre au rebut les piles et le thermomètre infrarouge sans contact (modèle : JXB-182) séparément.

Vous pouvez retirer les piles comme suit :

➔ Schéma de retrait des piles

- ① Ouvrir le couvercle au dos de l'appareil
- ② Retirer les piles.

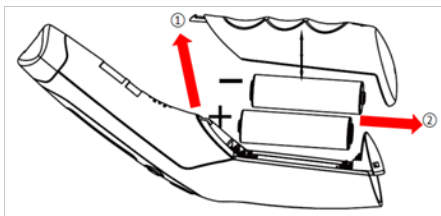

Les piles représentent un danger pour la santé et l'environnement ! Il ne faut jamais ouvrir, endommager ou avaler des piles, ni les laisser polluer l'environnement. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et dangereux pour l'environnement. Les piles retirées doivent être éliminées au point de vente ou dans les conteneurs correspondants mis à disposition dans les points de collecte par les autorités publiques locales chargées des déchets et traitées conformément à la directive 2006/66/CE.

Les piles et les déchets électroniques recyclables doivent être éliminés dans un conteneur séparé. Les matériaux d'emballage doivent être éliminés conformément aux réglementations locales. Consultez les points de collecte agréés pour plus d'informations.

En Allemagne

Pour l'élimination des déchets électroniques recyclables, vous pouvez rechercher les points de collecte autorisés sur le site web suivant : [https : //www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen](https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen)

Pour les piles, vous pouvez rechercher les points de collecte autorisés sur le site web suivant : [https : //www.ear-system.de/ear-verzeichnis/battghersteller#no-back](https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/battghersteller#no-back)

Méthode de recherche : utilisez votre code postal ou le nom de la ville et de l'état dans lesquels vous vivez pour trouver les points de collecte près de chez vous.

Autres pays

Pour obtenir des informations spécifiques à votre pays sur l'élimination des déchets, contactez votre revendeur ou importateur local.

NE

TEMPO EASY

Non-contact Infrared Thermometer User's manual



SPENGLER MEDICAL

Address: 30 rue Jean de Guirmand,
13290 Aix-en-Provence, FRANCE



Guangzhou Berrcom Medical Device Co., Ltd

Address: No.38 Huanzhen Xi Road, Dagang
Town, Nansha, 511470 Guangzhou, Guangdong,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86(20)34938449
Email: service@berrcom.com



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Address: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg,
Germany

CE 0123

NOTE

You must read this instruction manual thoroughly before use and follow all instructions.

Keep the instructions for later use.

You must check the device functions according to this instruction manual before use each time and only use this device if it is in proper working condition.

CONTENTS

I. INTENDED USE	24
II. WARNINGS AND PRECAUTION	24
III. PRINCIPLE OF OPERATION OF NON-CONTACT INFRARED THERMOMETER.....	26
IV. PRODUCT DESCRIPTION	26
V. HOW TO USE YOUR NON-CONTACT INFRARED THERMOMETER.....	26
VI. TURNING ON AND SETTING THE THERMOMETER.....	27
VII. TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	29
VIII. BATTERIES	30
IX. INCLUDED IN DELIVERY	30
X. CLEANING AND DISINFECTION	31
XI. TROUBLESHOOTING	32
XII. SIGNS AND SYMBOLS	32
XIII. EMC DECLARATION	35
XIV. WARRANTY/SERVICE	38
XV. DISPOSAL	39



• VERSION FRANÇAISE	P. 2
• ENGLISH VERSION	P. 22
• VERSIÓN ESPAÑOLA	P. 42
• النسخة العربية	ص. 62
• SUOMENKIELINEN VERSIO	S.80

I. INTENDED USE

The device is an infrared thermometer intended to measure the forehead temperature of infants and adults without contacting the human body. It can be used by consumers in a household environment and doctors in the clinic as a reference.



II. WARNINGS AND PRECAUTIONS

- Only use this thermometer once you have read and understood the instruction for use.
- Only use this thermometer for the specific purpose described in the instruction manual. Any misuse will void the warranty.
- This thermometer may be used for professional purposes or personal home use.
- Using this thermometer is no substitute for consulting a doctor. Do not self-diagnose or self-medicate based on the measurements without consulting your doctor. In particular, do not start taking any new medication or change the type and/ or dosage of any existing medication without prior approval.
- In particular, do not take any new medication or change the type and/or dosage of any existing medication without consulting your doctor and obtaining your doctor's approval.
- This thermometer must be operated by adults and be placed out of the reach of infants.
- Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be a choking hazard or be swallowed.
- If this thermometer is stored in a cooler or warmer location than where it is being used, please put it in the operation place for at least 30 minutes before taking the measurement.
- After physical activity, a bath, or spend in time outdoors, wait approximately 30 minutes before you measure the temperature on your forehead
- To ensure an accurate measurement, you should only use this thermometer indoors when the ambient temperature range is between 10°C (50°F) and 40°C (104°F).
- Before and after each use, the thermometers should be cleaned according to the requirement of this manual to avoid possible bacterial infections.
- Do not expose this thermometer to electric shocks.
- Do not expose this thermometer to extreme temperature conditions of greater than

55°(131°) or less than -20° (-4°).


- Do not use this thermometer in relative humidity higher than 85%.
- Do not put this product in a place with direct sunlight, high temperature, high humidity, excessive dust, or the place where it may contact corrosive gas or liquid. Do not use this product in the above environment.
- Do not drop this thermometer.
- Do not touch the glass of the infrared sensor with your fingers as it is extremely fragile and could cause injury.
- Do not use this thermometer if it is damaged.
- Do not open up this thermometer. It contains small parts which might be swallowed by children.
- Never immerse the device in water or other cleaning liquids, and do not let any liquid enters the interior of this product.
- Remove the batteries if you do not wish to use the unit for an extended period of time; otherwise, there is a risk of battery leakage.
- Keep the thermometer away from electromagnetic fields produced by objects such as microwave ovens, arc welders or induction heaters.
- The device should no longer be reused when it reaches the expected service life (5 years, from the date of production) of the device. See chapter XV to dispose the device.
- Electrical components and batteries have heavy metal or chemicals which may do harm to environment, please follow the local law and regulation on its disposal.
- You contact manufacture or your dealer on the following issues:
 - If an error occurs or if the thermometer is damaged : **DO NOT** attempt to repair the thermometer yourself, as this will void the warranty. Only have repairs carried out by authorized service partners. The **MANUFACTURER** will make available on request circuit diagrams, component part lists, descriptions, calibration instructions, or other information that will assist **SERVICE PERSONNEL** to repair those parts of **ME EQUIPMENT** that are designated by the **MANUFACTURER** as repairable by **SERVICE PERSONNEL**.
 - If you need assistance in setting up, using, or maintaining the thermometer.
 - If you have unexpected operation or events to report.

III. PRINCIPLE OF OPERATION OF NON-CONTACT INFRARED THERMOMETER

All objects, solid, liquid, or gas, emit energy by radiation. The intensity of this energy depends on the temperature of the object. The infrared thermometer is, therefore, able to measure the temperature of a person by the energy the person emits. This measurement can be taken thanks to an external temperature probe on the device, which permanently analyses and registers the ambient temperature. This, as soon as the operator holds the thermometer near the body and activates the radiation sensor, the measurement is taken instantly by detecting the infrared heat generated by the arterial blood flow. Therefore, body heat can be measured without any interference from the heat of the surrounding environment.

Note: The reference body temperature for the non-contact infrared thermometer is axillary temperature.

IV. PRODUCT DESCRIPTION

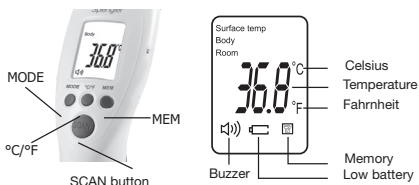

V. HOW TO USE YOUR NON-CONTACT INFRARED THERMOMETER

HOW TO TAKE A TEMPERATURE

Aim at the FOREHEAD, over the right temporal region, from a distance of about 3cm~5 cm, press the thermometer's measurement button and the temperature is instantly displayed.

Please observe the following before any temperature measurement to ensure a stable and reliable result:

- Push back hair from the forehead
- Wipe away any perspiration from the forehead
- Avoid any drafts (e.g. from nasal specs, air conditioning...)
- Allow a 1 minute interval between two measurements for different individuals.

- Each time there is a significant change in the ambient temperature due to a change in environment, to allow the TEMPO EASY Non-contact infrared thermometer to acclimatise to this ambient temperature for at least 30 minutes before using it.



For reliable results:

- **Do NOT attempt to take an individual's temperature by aiming the device at a body part other than the forehead (i.e., arms, legs, torso, etc.).**
- **Do NOT move the thermometer before the final result is displayed.**
- **Do NOT take an individual's temperature near any drafts (i.e. wind, air conditioner, fans) .**
- **Do NOT take an individual's temperature shortly after he or she participated in vigorous physical activity, bathed, took medicine, ate or drank, or had a cold or warm compress on his or her forehead.**
- **Do NOT take an individual's temperature when there has been a significant change in ambient conditions. Allow the device to adjust to the significant change in the ambient temperature due to a change in environment for at least 30 minutes before taking the measurement.**
- **Wait at least 3 to 5 seconds between measurements.**
- **We recommend that you take three measurements on the forehead. If the results of the three measurements are different, use the one with the highest value.**

VI. TURNING ON AND SETTING THE THERMOMETER

1. Install battery.
2. For the first use or when inserting new batteries wait between 10 and 15 minutes for the warm-up of the apparatus and when inserting the new batteries.
3. Aim towards the forehead, from a distance of 3 cm~5 cm, press the measuring key, the temperature is displayed in 1 second.
4. Before taking the temperature, make sure to remove hair and perspiration from the forehead.
5. **SWITCH ON THE DEVICE**
In the switch on state, press the "SCAN" button, one second after the screen panel in full display, it will enter the standby mode with the sign "---°C" or "----°F".

Then press the "SCAN" button again, you will get the measuring result in 1 second. But if there is no more operation, it will turn off within 30 seconds automatically.

6. In the switch on state, Setting the mode
 - a. Press "MODE" button, and the screen will display: Body...°C
 - b. Press again "MODE" button and the screen will display: Surface Temp...°C
 - c. Press again "MODE" button and the screen will display: Room...°C

7. DATA MEMORY

When the device is on, press "MEM" button, which will then display the last temperature and allow for a view of the last 32 measurements.

8. DELETE THE MEMORY

When the device is on, press "MEM" button and hold for 5 seconds, and all data in memory will be deleted. Then press "MEM" button again, the display will show "CLr".

9. HIGH-TEMPERATURE PROMPT FUNCTION

Under the body temperature mode, if the measured body temperature is higher than or equal to 38°C, the product will beep continuously.



NOTE : THE SURFACE TEMPERATURE AND ROOM TEMPERATURE ARE NOT MEDICAL USE.

The surface temperature differs from the body temperature. To obtain the body temperature, you should use the "body temperature mode". Use the Surface Temperature Mode to measure the temperature of a baby-bottle/bath water and the Room Temperature Mode to measure the room temperature.

10. In the switch on state, press "🔊" can open or close the buzzer. When the screen shows "ON", the buzzer opened. When shows "OFF", buzzer closed.

11.CHANGING THE BATTERIES

Display: when the LCD screen displays "Battery", the battery is used.


VII. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Items	Specifications
Battery	DC 3V (2 pcs AA batteries)
Temperature sensor	Infrared Sensor
Measuring distance	3cm - 5cm(1.2in - 2in)
Measurement range	Body temperature mode: 32.0°C ~ 43.0°C (89.6°F ~ 109.4°F) Surface temperature mode: 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F) Room temperature mode: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Measuring accuracy	Body temperature mode: 32.0°C ~ 34.9°C (89.6°F ~ 94.8°F) : ±0.3°C (±0.6°F) 35.0°C ~ 42.0°C (95°F ~ 107.6°F) : ±0.2°C (±0.4°F) 42.1°C ~ 43.0°C (107.8°F ~ 109.4°F) : ±0.3°C (±0.6°F)
Clinical repeatability	≤0.2°C (0.4°F)
Display resolution	0.1°C (0.1°F)
Measurement Time	1 second
Memory	32 sets
Operation Environment	Ambient temperature: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Relative humidity: ≤85%RH Atmospheric Pressure: 700 ~ 1060 hPa
Storage and transportation condition	Ambient temperature: -20°C ~ 55°C (-4°F~131°F) Relative humidity: ≤ 95%RH Atmospheric Pressure: 700 ~ 1060 hPa
Weight	Approx. 80g (Battery excluded)
Product Size	Approx. 175 x 50 x 52 mm (L x W x H)
Expected Service Life	5 years
Automatic power-off	≤ 30 secs
Measuring site	Forehead
Reference body site	Axillary
Operation Mode	Adjusted mode

VIII. BATTERIES

1. CHANGING THE BATTERIES

Operation: Open the lid and change the batteries, taking great care with the correct positioning. A mistake with this could cause damage to the apparatus and compromise the guarantee of your TEMPO EASY Non-contact infrared thermometer. Never use rechargeable batteries. Use only batteries for single usage.

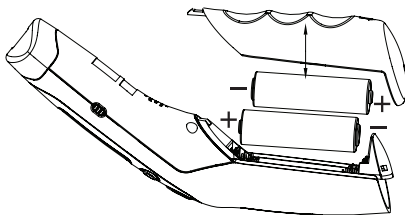

2. DISPOSING OF BATTERIES

To protect the environment, dispose of empty batteries at appropriate collection sites according to national or local regulations.

The disposal method is defined in Chapter XV.



Notes on handling batteries

- If your skin or eyes come into contact with battery fluid, rinse the affected area with water and seek medical assistance.



Choking hazard! Small children may swallow and choke on batteries. Store batteries out of the reach of small children.

- If a battery has leaked, put on protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth.
- Protect batteries from excessive heat.



Risk of explosion! Do not throw batteries into a fire.

- Use identical or equivalent battery types only.
- Always replace all batteries at the same time.
- Do not use rechargeable batteries.
- Do not disassemble, split or crush the batteries.

IX. INCLUDED IN DELIVERY

- 1 x Thermometer
- 1 x user manual
- 2 x AA batteries

X. CLEANING AND DISINFECTION

The thermometer is a multi-patient reusable device, and the cleaning and disinfection instructions were validated. Please follow the instructions to clean/disinfect your thermometer prior to use.

Cleaning:

- 1) Use a cotton swab moistened with hot water or neutral detergent to throughout clean the casing of thermometer and measuring probe to remove stain or oil.
- 2) Inspect the thermometer visually after the cleaning process, ensure there is no soil or stain is seen. If the device is determined not to be visually clean at the end of the cleaning step, you should either repeat the relevant previous cleaning steps or safely dispose of the device so that a visibly soiled device is not used again.

Disinfection:

- 1) Disinfect the thermometer casing and the probe for 30 seconds with a cotton swab or non-dust cloth dipped in 75% ethanol.
- 2) Repeat the above steps at least 3 times, then wipe surface and probe dry with a clean cloth, and wait about 1 minute for drying after disinfection process.

Note:

- Ensure that no liquid enters the interior of the thermometer.
- Never use abrasive cleaning agents, thinners, or benzene for cleaning, and never immerse the thermometer in water or other cleaning liquids.
- Take care not to scratch the surface of the probe lens and the display.
- If the visual inspection identifies unacceptable deterioration such as corrosion, discoloration, pitting, cracked, the device should not be further used and should be discarded.
- If the thermometer has been used in patients, please visually inspect the thermometer to determine if there is stain or oil on the casing or probe after each use, and follow the instruction of cleaning and disinfection to cleaning your thermometer.

CARE AND MAINTENANCE

- Please clean the thermometer regularly, usually once a month.
- If the probe tip is damaged, please contact the maintenance center.
- If necessary, you can clean it properly according to the actual dirt of the product; if you do not use this product for a long time (more than 2 months), replace all the batteries take out.
- Store the thermometer in a dry location free from dust and contamination and away from direct sunlight.
- Do not use other batteries than mentioned batteries, do not use rechargeable batteries, do not throw in fire.
- Do not expose the thermometer to sunlight or water.
- Do not use the thermometer rudely. Dropping, crashing and severe shock will damage the product.

Calibration:

This thermometer is calibrated at the time of manufactured, requires a yearly safety check for medical infrared thermometer. If at any time you question the accuracy of the measurement, please contact the retailer immediately.

The calibration operation of this product must have corresponding calibration equipment, otherwise it cannot calibrate by itself.

XI. TROUBLESHOOTING

If you have any problem while using your thermometer, please refer to this guide to help resolve the problem. If the problem cannot be resolved, please contact our customer service.

THE SCREEN DISPLAYS THE MESSAGE HI

In Body Temperature Mode, the thermometer will display "HI" if the measured object temperature is higher than 43°C (109.4°F).

In Surface Temperature Mode, the thermometer will display "HI" if the measured object temperature is higher than 60°C (140°F).

In Room Temperature Mode, the thermometer will display "HI" if the measured ambient temperature is higher than 40°C (104°F).



THE SCREEN DISPLAYS THE MESSAGE LO

In Body Temperature Mode, the thermometer will display “Lo” if the measured object temperature is lower than 32°C (89.6°F).

In Surface Temperature Mode, the thermometer will display “Lo” if the measured object temperature is lower than 0°C (32°F).

In Room Temperature Mode, the thermometer will display “Lo” if the measured ambient temperature is lower than 0°C (32°F).



This message displays for various reasons. Please refer to the list of main issues below:

Reasons for LO message display	Advice
Temperature reading hampered by hair or perspiration.	Make sure there is no obstruction or dampness before taking temperature.
Temperature hampered by an air draft or dramatic change in ambient temperature.	Make sure there is no air blowing in the area of use, which could affect the infrared reading.
Temperature readings are too close together, and the thermometer did not have time to reboot.	Pause for at least 3-5 seconds between readings; a 15 seconds pause is recommended.
The measuring distance is too far.	Take measurements at the recommended distance (app. 3-5 cm) .

XII. SIGNS AND SYMBOLS

Symbol	Description of symbol
 Spengler TEMPO EASY	Trade mark
	Indicates the need for the user to consult the instructions for use for crucial cautionary information such as warnings and precautions that can not, for a variety of reasons, be presented on the medical device itself.
	Application part, Type BF
	Direct current
IP22	Degree of protection against harmful ingress of water and particulate matter 2 Protected and against solid foreign objects of 12.5mm Ø and greater 2 Protection against vertically falling water drops when ENCLOSURE tilted up to 15°

Symbol	Description of symbol
	DISPOSAL: Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.
	Please read the instructions carefully.
	Lot number
	Manufacturer
	Medical device
	Symbol of European Authorized Representative, expressly indicate the name and address of European Authorized Representative after the symbol
	The CE labelling certifies that the product complies with the essential requirements of EU regulations on medical device.
	Model number
	Made in China
	Importer
	Distributor
	Fragile, handle with care
	Keep dry
	Temperature limit
	Humidity limitation
	Packaging direction
	Do not stack more than 6 boxes
	Catalog number
	Serial number
	Unique device identifier
	Date of manufacture
	Dispose of packaging in an environmentally responsible way.

XIII. EMC DECLARATION

EMC DECLARATION

The ME EQUIPMENT or ME SYSTEM is suitable for home healthcare and clinic environments.

Statement: The Non-contact Infrared thermometer model JXB-182 was tested according to the recommendations of Technical Report IEC TS 60601-4-2: Medical electrical equipment – Part 4-2: Guidance and interpretation – Electromagnetic immunity; performance of medical electrical equipment and medical electrical systems.

Warning: Don't near active HF surgical equipment and the RF shielded room of an ME system for magnetic resonance imaging, where the intensity of EM disturbances is high.

Warning: Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.

Warning: Use of accessories, transducers and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.

Warning: Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the equipment JXB-182, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.

1. All necessary instructions for maintaining BASIC SAFETY and ESSENTIAL PERFORMANCE with regard to electromagnetic disturbances for the expected service life. Portable and mobile RF communication equipment may affect the performance of the JXB-182, avoiding strong electromagnetic interference when used, such as near mobile phones, microwave ovens, etc.

2. Guidance and manufacturer's declaration-electromagnetic emissions and Immunity.

Table 1

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions	
Emissions test	Compliance
RF emissions CISPR 11	Group 1
RF emissions CISPR 11	Class B
Harmonie emissions IEC 61000-3-2	Not application
Voltage fluctuations/ flicker emissions IEC 61000-3-3	Not application

Table 2

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic Immunity		
Immunity Test	IEC 60601-1-2 Test level	Compliance level
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV au contact ±2 kV, ±4 kV, ±8kV,±15 kV air	±8 kV au contact ±2 kV, ±4 kV, ±8kV,±15 kV air
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	Not application	Not application
Surge IEC 61000-4-5	Not application	Not application
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	Not application	Not application
Power frequency magnetic field IEC 61000-4-8	30A/m 50Hz/60Hz	30A/m 50Hz/60Hz
Conducted RF IEC61000-4-6	Not application	Not application
Radiated RF IEC61000-4-3	10 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80% AM at 2 kHz	10V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80% AM at 2 kHz
NOTE UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.		

Table 3

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic Immunity			
Modulation	Modulation	Distance (m)	IMMUNITY TEST LEVEL (V/m)
Pulse modulation 18 Hz	1.8	0.3	27
FM±5 kHz deviation 1 kHz sine	2	0.3	28
Pulse modulation 217 Hz	0.2	0.3	9
Pulse modulation 18 Hz	2	0.3	28
Pulse modulation 217 Hz	2	0.3	28
Pulse modulation 217 Hz	2	0.3	28
Pulse modulation 217 Hz	0.2	0.3	9

Table 3

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic Immunity			
Radiated RF IEC61000-4-3 (Test specifications for ENCLOSURE PORT IMMUNITY to RF wireless communications equipment)	Test Frequency (MHz)	Band (MHz)	Service
	385	380-390	TETRA 400
	450	430-470	GMRS 460 FRS 460
	710	704-787	Bande LTE 13,17
	745		
	780		
	810	800-960	GSM800/900, TETRA800, CDMA850, bande LTE5
	870		
	930		
	1720	1700- 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; Bande LTE 1,3,4,25; UMTS
	1845		
	1970		
	2450	2400- 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7
	5240	5100- 5800	WLAN 802.11 a/n
	5500		
	5785		

Table 4

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic Immunity				
Radiated RF IEC61000- 4-39 (Test specifications for ENCLOSURE PORT IMMUNITY to proximity magnetic fields)	Test Frequency	Modula- tion	IEC 60601- 1-2 Test Level (A/m)	Co- pliance level (A/m)
	30 kHz	CW	8	8
	134,2 kHz	Pulse modula- tion 2.1 kHz	65	65
	13,56 MHz	Pulse modula- tion 50 kHz	7,5	7,5

XIV. WARRANTY/SERVICE

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and optical changes without notice.

Warranty and repair terms

Warranty: 24 months.

Please contact your dealer or the service center in case of a claim under warranty. If you have to return the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the defect is.

The following warranty terms apply:

- 1.The warranty period for Spengler products is 24 months from the date of purchase. In the case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven using the sales receipt or invoice.
- 2.Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.
- 3.Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the replacement parts.
- 4.The following is excluded under warranty:
 - a.All damage that has arisen due to improper treatment, e.g. non observance of the user instructions.
 - b.All damage due to repairs or tampering by the customer or unauthorized third parties.
 - c.Damage that has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service center.
 - d.Accessories which are subject to normal wear and tear.
- 5.The liabilities for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

• **GUANGZHOU BERRCOM MEDICAL DEVICE CO., Ltd expressly disclaims all warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.**

• **Under no circumstances shall Spengler have any obligation or liability for any loss of profit or any consequential, incidental indirect, special, punitive, or contingent damages whatsoever concerning the claims made by any customer, consumer, or other user of Spengler products.**

• **In the event that any applicable laws impose warranties, conditions, or obligations that cannot be excluded or modified, this paragraph shall apply to the greatest extent allowed by such laws.**

XV. DISPOSAL



It is required that you should not dispose of WEEE as unsorted municipal waste and collect such WEEE separately.

In accordance with Directive 2012/19/EU and national disposal regulations regarding old electrical and electronic devices, please be advised that such items must be disposed of in a special way within the European Union (EU). These regulations require the environmentally friendly recycling/disposal of old electrical and electronic devices. Such items must not be disposed of as domestic refuse. This has been expressed using the icon of the “crossed out trash can”.



The Non-contact Infrared Thermometer (Model: JXB-182) contains batteries and recyclable electronic waste. To protect the environment, do not dispose of it in household waste as unsorted municipal waste, but collect separately and take it to an appropriate local collection center.


The Non-contact Infrared Thermometer (Model: JXB-182) is classified as small equipment (5th category) according to ANNEX IV of Directive 2012/19/EU.

Before disposing of your Non-contact Infrared Thermometer (Model: JXB-182), please take away the batteries from Non-contact Infrared Thermometer (Model: JXB-182) and dispose of the batteries and Non-contact Infrared Thermometer (Model: JXB-182) separately.

You can take away the batteries as follows:

➔ Battery remove diagram

- ① Open the lid on the back of the device
- ② Remove the batteries.

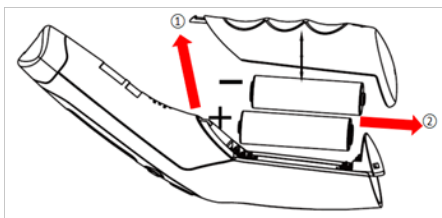

Batteries represent a hazard to health and the environment! Never open, damage, or swallow batteries or allow them to pollute the environment. They may contain toxic, ecologically hazardous heavy metals. The removed batteries shall be disposed of at the point of sale or in the corresponding containers provided at collection points by local public waste authorities and treated according to 2006/66/EC.

The batteries and recyclable electronic waste shall be disposed of in a separate waste container.

Packaging materials must be disposed of according to local regulations. Consult the authorized collection points for more information.

In Germany

For the recyclable electronic waste disposal, you can search the authorized collection points at the following website:

https: //www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen

For batteries, you can search the authorized collection points at the following website:

https: //www.ear-system.de/ear-verzeichnis/battghersteller#no-back

Search method: using your postcode or the name of the city and state where you live to find collection points near you.

Other countries

For country-specific information on disposal, contact your local dealers or importer.

ES

TEMPO EASY

Termómetro de infrarrojos sin contacto

Manual de instrucciones



SPENGLER MEDICAL

Dirección: 30 rue Jean de Guiramand,
13290 Aix-en-Provence, FRANCIA



Guangzhou Berrcom Medical Device Co., Ltd

Address: No.38 Huanzhen Xi Road, Dagang
Town, Nansha, 511470 Guangzhou, Guangdong,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86(20)34938449
Email: service@berrcom.com



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)

Dirección: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg,
Alemania

CE 0123

NOTA

Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente este manual de instrucciones y siga todas las instrucciones. Conserve las instrucciones para un uso posterior. Debe comprobar el funcionamiento del aparato de acuerdo con este manual de instrucciones antes de utilizarlo cada vez, y emplearlo solo si está en condiciones de funcionamiento adecuadas

CONTENIDO

I. USO PREVISTO	44
II. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.....	44
III. PRINCIPIO OPERATIVO DEL TERMÓMETRO DE INFRARROJOS SIN CONTACTO	46
IV. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	46
V. CÓMO USAR EL TERMÓMETRO DE INFRARROJOS SIN CONTACTO.....	46
VI. ENCENDIDO Y AJUSTE DEL TERMÓMETRO ...	47
VII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	49
VIII. PILAS	50
IX. INCLUIDO EN LA ENTREGA.....	50
X. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.....	51
XI. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	52
XII. SIGNOS Y SÍMBOLOS	53
XIII. DECLARACIÓN EMC	55
XIV. GARANTÍA / SERVICIO TÉCNICO.....	58
XV. ELIMINACIÓN.....	59



• VERSION FRANÇAISE	P. 2
• ENGLISH VERSION	P. 22
• VERSIÓN ESPAÑOLA	P. 42
• النسخة العربية	ص. 62
• SUOMENKIELINEN VERSIO	S.80

I. USO PREVISTO

El aparato es un termómetro de infrarrojos cuyo fin es medir la temperatura de la frente de niños y adultos sin entrar en contacto con el cuerpo humano. Puede ser utilizado por el público general en un entorno doméstico y por profesionales médicos en la consulta, por ejemplo.



II. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Utilice este termómetro solo cuando haya leído y comprendido el manual de instrucciones.
- Utilice este termómetro únicamente para el fin específico descrito en el manual de instrucciones. Cualquier uso indebido invalidará la garantía.
- Este termómetro puede utilizarse con fines profesionales o para uso doméstico personal.
- El uso de este termómetro no sustituye la consulta a un médico. No se autodiagnostique ni automedique basándose en las mediciones sin consultar a su médico. En particular, no empiece a tomar ninguna medicación nueva ni cambie el tipo ni la dosis de ninguna medicación existente sin aprobación previa.
- En particular, no empiece a tomar ninguna medicación nueva ni cambie el tipo ni la dosis de ninguna medicación existente sin consultar antes a su médico y recibir su aprobación.
- Este termómetro es para uso de personas adultas y debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que los niños no utilicen este aparato sin supervisión; algunas piezas son lo suficientemente pequeñas como para suponer un riesgo de asfixia o de ingestión.
- Si este termómetro se conserva en un lugar más fresco o más caliente que donde se va a utilizar, póngalo en el lugar de uso durante al menos 30 minutos antes de tomar la medición.
- Después de realizar una actividad física, bañarse o pasar tiempo al aire libre, espere aproximadamente 30 minutos antes de medirse la temperatura en la frente.
- Para garantizar una medición precisa, solo debe utilizar este termómetro en interiores cuando la temperatura ambiente oscile entre 10 °C (50 °F) y 40 °C (104 °F).
- Antes y después de cada uso, el termómetro debe limpiarse de acuerdo con los requisitos de este manual para evitar posibles infecciones bacterianas.
- No exponga este termómetro a descargas eléctricas.

- No exponga este termómetro a condiciones extremas de temperatura superiores a 55 °C (131 °F) o inferiores a -20 °C (-4 °F).•

No utilice este termómetro con una humedad relativa superior al 85 %.

- No coloque este producto en un lugar con luz solar directa, temperatura elevada, humedad alta, polvo excesivo o donde pueda entrar en contacto con gases o líquidos corrosivos. No utilice el producto en estos lugares.

- No deje caer el termómetro.

- No toque el vidrio del sensor de infrarrojos con los dedos, ya que es extremadamente frágil y podría causarle lesiones.

- No utilice este termómetro si está dañado.

- No abra el termómetro. Contiene piezas pequeñas que podrían ser ingeridas por los niños.

- No sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos de limpieza, y no permita que ningún líquido penetre en el interior de este producto.

- Retire las pilas si no desea utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo; de lo contrario, existe riesgo de fuga.

- Mantenga el termómetro alejado de campos electromagnéticos producidos por objetos como hornos microondas, soldadores de arco o calentadores de inducción.

- El aparato debe dejar de reutilizarse cuando alcance su vida útil prevista (5 años, a partir de la fecha de fabricación). Consulte el capítulo XV para eliminar el aparato.

- Los componentes eléctricos y las pilas contienen metales pesados o sustancias químicas que pueden dañar el medio ambiente; respete las leyes y normativas locales para su eliminación.

- Póngase en contacto con el fabricante o con su distribuidor en los siguientes casos:

Si se produce un error o si el termómetro está dañado: NO intente reparar el termómetro por su cuenta, ya que esto invalidaría la garantía. Las reparaciones únicamente podrán llevarse a cabo por el servicio técnico autorizado. El FABRICANTE pondrá a disposición del PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO que lo solicite diagramas de circuitos, listas de componentes, descripciones, instrucciones de calibración u otra información que le ayude a reparar las piezas del EQUIPO ELÉCTRICO que el FABRICANTE designe como reparables por el PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO.

Si necesita ayuda para configurar, utilizar o mantener el termómetro.


Si hay funcionamientos o eventos inesperados que comunicar.

III. PRINCIPIO OPERATIVO DEL TERMÓMETRO DE INFRARROJOS SIN CONTACTO

Todos los objetos, sólidos, líquidos o gaseosos, emiten energía por radiación. La intensidad de esta energía depende de la temperatura del objeto. El termómetro de infrarrojos es, por tanto, capaz de medir la temperatura de una persona por la energía que ésta emite. Esta medición puede realizarse gracias a una sonda de temperatura externa del aparato, que analiza y registra permanentemente la temperatura ambiente. De este modo, en cuanto el operador acerca el termómetro al cuerpo y activa el sensor de radiación, la medición se realiza instantáneamente mediante la detección del calor infrarrojo generado por el flujo sanguíneo arterial. Por lo tanto, el calor corporal puede medirse sin ninguna interferencia del calor del entorno.

Nota: La temperatura corporal de referencia para el termómetro de infrarrojos sin contacto es la temperatura axilar.

IV. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

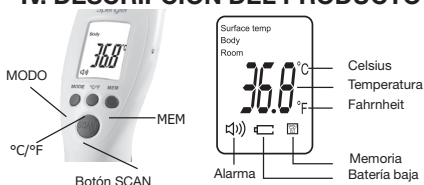

V. CÓMO USAR EL TERMÓMETRO DE INFRARROJOS SIN CONTACTO

CÓMO TOMAR LA TEMPERATURA

Apunte a la FRENTE, sobre la región temporal derecha, a una distancia de unos 3~5 cm, pulse el botón de medición del termómetro y la temperatura se mostrará al instante. Tenga en cuenta lo siguiente antes de cualquier medición de temperatura para garantizar un resultado estable y fiable:

- Aparte el pelo de la frente
- Seque el sudor de la frente
- Evite las corrientes de aire (por ejemplo, de las cánulas nasales, del aire acondicionado...)
- Deje un intervalo de 1 minuto entre dos mediciones para cada individuo.
- Cada vez que se produzca un cambio

significativo de la temperatura ambiente debido a un cambio de entorno, deje que el termómetro infrarrojo TEMPO EASY Non-contact se aclimate a esta temperatura ambiente durante al menos 30 minutos antes de utilizarlo.



Para obtener resultados fiables:

- **NO** intente tomar la temperatura de una persona apuntando el aparato a una parte del cuerpo que no sea la frente (es decir, brazos, piernas, torso, etc.).
- **NO** mueva el termómetro antes de que aparezca el resultado final.
- **NO** tome la temperatura de una persona cerca de corrientes de aire (por ejemplo, viento, aire acondicionado, ventiladores).
- **NO** tome la temperatura a una persona poco después de que haya realizado una actividad física intensa, se haya bañado, tomado un medicamento, comido o bebido, o se haya puesto una compresa fría o caliente en la frente.
- **NO** tome la temperatura a una persona cuando se haya producido un cambio significativo en las condiciones ambientales. Cada vez que se produzca un cambio significativo de la temperatura ambiente debido a un cambio de entorno, deje que el aparato se ajuste durante al menos 30 minutos antes de utilizarlo.
- Espere al menos de 3 a 5 segundos entre mediciones.
- Le recomendamos que tome tres medidas en la frente. Si los resultados de las tres mediciones son diferentes, utilice la que tenga el valor más alto.

VI. ENCENDIDO Y AJUSTE DEL TERMÓMETRO

1. Coloque las pilas.
 2. Para el primer uso o al insertar pilas nuevas espere de 10 a 15 minutos a que el aparato se adapte a la temperatura.
 3. Apunte hacia la frente (véase el diagrama siguiente para la colocación del Tempo Easy), desde una distancia de 3 cm ~ 5 cm, pulse la tecla de medición, la temperatura se muestra en 1 segundo.
 4. Antes de tomar la temperatura, asegúrese de retirar el cabello y el sudor de la frente.
 5. Encienda el aparato
- En el estado de encendido, pulse el botón «SCAN», un segundo después de que el panel de pantalla se muestre por completo, entrará en el modo de espera con el signo «---°C» o «---

-°F». A continuación, pulse de nuevo el botón «SCAN», obtendrá el resultado de la medición en 1 segundo. Si ya no hay más actividad, se apagará en 30 segundos automáticamente.

6. En el estado de encendido, ajuste del modo.

a. Pulse el botón «MODE» y en la pantalla se mostrará: Cuerpo...°C

b. Pulse de nuevo el botón «MODE» y en la pantalla se mostrará: Temp. superficie...°C

c. Pulse de nuevo el botón «MODE» y en la pantalla se mostrará: Ambiente...°C

7. MEMORIA DE DATOS

Con el dispositivo encendido, pulse el botón «MEM»: se mostrará la última temperatura y podrá consultar las últimas 32 mediciones.

8. BORRAR LA MEMORIA

Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga pulsado el botón «MEM» durante 5 segundos y se borrarán todos los datos de la memoria. A continuación, pulse de nuevo el botón «MEM» y la pantalla mostrará «CLr».

9. FUNCIÓN DE AVISO DE TEMPERATURA ALTA

En el modo de temperatura corporal, si la temperatura corporal medida es superior o igual a 38 °C, el producto emitirá un pitido continuo.



NOTA: LA TEMPERATURA DE SUPERFICIE Y LA TEMPERATURA AMBIENTE NO SON DE USO MÉDICO.

La temperatura de superficie difiere de la temperatura corporal. Para obtener la temperatura corporal, debe utilizar el «modo temperatura corporal». Utilice el modo Temperatura de superficie para medir la temperatura de un biberón o del agua para el baño de un bebé y el modo Temperatura ambiente para medir la temperatura ambiente.

10. En el estado de encendido, pulse «» para activar o desactivar la alarma. Cuando la pantalla muestra «ON», la alarma está activa. Cuando muestra «OFF», la alarma está desactivada.

11. CAMBIAR LAS PILAS

Pantalla: cuando la pantalla LCD muestra «Battery», la pila está gastada.


VII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículos	Especificaciones
Pila	3 V CC (2 pilas AA)
Sensor de temperatura	Sensor infrarrojo
Distancia de medición	3 cm - 5 cm (1,2 in - 2 in)
Intervalo de medición	Modo temperatura corporal: 32,0 °C ~ 43,0 °C (89,6 °F ~ 109,4 °F) Modo temperatura de superficie: 0 °C ~ 60 °C (32 °F ~ 140 °F) Modo temperatura ambiente: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Precisión de medición	Modo temperatura corporal: 32,0 °C ~ 34,9 °C (89,6 °F ~ 94,8 °F): ±0,3 °C (±0,6 °F) 35,0 °C ~ 42,0 °C (95 °F ~ 107,6 °F): ±0,2 °C (±0,4 °F) 42,1 °C ~ 43,0 °C (107,8 °F ~ 109,4 °F): ±0,3 °C (±0,6 °F)
Repetibilidad clínica	≤0,2 °C (0,4 °F)
Resolución de pantalla	0,1 °C (0,1 °F)
Tiempo de medición	1 segundo
Memoria	32 conjuntos
Entorno operativo	Temperatura ambiente: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Humedad relativa: ≤85 % HR Presión atmosférica: 700h Pa ~ 1060h Pa
Condiciones de almacenamiento y transporte	Temperatura ambiente: -20 °C ~ 55 °C (-4 °F ~ 131 °F) Humedad relativa: ≤95 % HR Presión atmosférica: 700h Pa ~ 1060h Pa
Peso	Aprox. 80g (sin pilas)
Tamaño del producto	Aprox. 175 x 50 x 52 mm (L x An x Al)
Vida útil prevista	5 años
Apagado automático	≤30 segundos
Lugar de medición	Frente
Lugar del cuerpo de referencia	Axila
Modo de funcionamiento	Modo ajustado

VIII. PILAS

1. CAMBIAR LAS PILAS

Modo de funcionamiento: Abra la tapa y cambie las pilas, preste atención a la posición correcta. Si se hace de forma equivocada, podría causar daños al aparato y comprometer la garantía de su termómetro infrarrojo TEMPO EASY Non-contact. No utilice nunca pilas recargables. Use pilas de un solo uso.

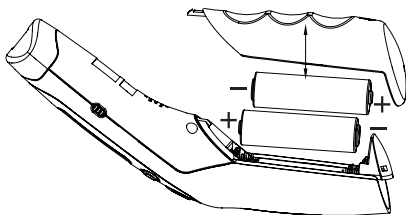

2. ELIMINACIÓN DE LAS PILAS

Para proteger el medio ambiente, elimine las pilas vacías en los lugares de recogida adecuados de acuerdo con la normativa nacional o local. El método de eliminación se define en el capítulo XV.



Notas sobre el manejo de las pilas

- Si la piel o los ojos entran en contacto con el líquido de la pila, aclare la zona afectada con agua y solicite asistencia médica.



¡Peligro de asfixia! Los niños pequeños pueden ingerir las pilas y atragantarse con ellas. Guarde las pilas fuera del alcance de los niños pequeños.

- Si una pila tiene fugas, use guantes protectores y limpie el compartimento de la pila con un paño seco.



- Proteja las pilas del calor excesivo.

¡Riesgo de explosión! No arroje las pilas al fuego.

- Utilice únicamente pilas idénticas o equivalentes.
- Sustituya siempre todas las pilas al mismo tiempo.
- No utilice pilas recargables.
- No desmonte, parta ni aplaste las pilas.

IX. INCLUIDO EN LA ENTREGA

- 1 termómetro
- 1 manual de usuario
- 2 pilas AA

X. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

El termómetro es un aparato reutilizable válido para varios pacientes, y se validaron las instrucciones de limpieza y desinfección. Siga las instrucciones para limpiar y desinfectar el termómetro antes de utilizarlo.

Limpieza:

- 1) Utilice un bastoncillo de algodón humedecido con agua caliente o detergente neutro para limpiar por completo la carcasa del termómetro y la sonda de medición para eliminar manchas o aceite.
- 2) Inspeccione visualmente el termómetro después del proceso de limpieza, asegúrese de que no se ven suciedad ni manchas. Si se determina que el aparato no está visualmente limpio al final de este paso de limpieza, debe repetir los pasos de limpieza anteriores pertinentes o eliminar el aparato de forma segura para que no se vuelva a utilizar un termómetro visiblemente sucio.

Desinfección:

- 1) Desinfecte la carcasa del termómetro y la sonda durante 30 segundos con un bastoncillo de algodón o un paño sin polvo humedecido en etanol al 75 %.
- 2) Repita los pasos anteriores al menos 3 veces, luego seque la superficie y la sonda con un paño limpio, y espere aproximadamente 1 minuto para que se seque después del proceso de desinfección.

Note:

- Asegúrese de que no entre líquido en el interior del termómetro.
- Nunca utilice productos de limpieza abrasivos, diluyentes o benceno para la limpieza, y nunca sumerja el termómetro en agua u otros líquidos de limpieza.
- Tenga cuidado de no rayar la superficie de la lente de la sonda y la pantalla.
- Si en la inspección visual se detecta un deterioro inaceptable, como corrosión, decoloración, picaduras o grietas, el aparato no debe seguir utilizándose y debe eliminarse.
- Si el termómetro se ha utilizado en pacientes, después de cada uso inspeccione visualmente el aparato para determinar si hay manchas o aceite en la carcasa o la sonda, y siga las instrucciones de limpieza y desinfección para limpiar el termómetro.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el termómetro con regularidad, normalmente una vez al mes.
- Si la punta de la sonda está dañada, póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
- Si es necesario, puede limpiarla de forma adecuada según la suciedad real del producto. Si no va a utilizar este producto durante un periodo prolongado (más de 2 meses), cambie todas las pilas que haya retirado.
- Guarde el termómetro en un lugar seco, libre de polvo y contaminación y alejado de la luz solar directa.
- No utilice otras pilas distintas a las mencionadas, no utilice pilas recargables, no las arroje al fuego.
- No exponga el termómetro a la luz solar ni al agua.
- No utilice el termómetro de forma brusca. Las caídas, los choques y los golpes fuertes dañarán el producto.

Calibración:

Este termómetro se calibra en el momento de su fabricación y requiere una revisión de seguridad anual, al tratarse de un termómetro médico de infrarrojos. Si en algún momento tiene dudas sobre la precisión de la medición, póngase en contacto con el distribuidor inmediatamente. Para calibrar este producto es necesario disponer del equipo de calibración adecuado; de lo contrario, no es posible calibrarlo por sí solo.

XI. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene algún problema al utilizar el termómetro, consulte esta guía para resolverlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

LA PANTALLA MUESTRA EL MENSAJE HI

En el modo de temperatura corporal, el termómetro mostrará «HI» si la temperatura medida del objeto es superior a 43 °C (109,4 °F).

En el modo de temperatura de superficie, el termómetro mostrará «HI» si la temperatura medida del objeto es superior a 60 °C (140 °F). En el modo de temperatura ambiente, el termómetro mostrará «HI» si la temperatura medida del objeto es superior a 40 °C (104 °F).



LA PANTALLA MUESTRA EL MENSAJE LO

En el modo de temperatura corporal, el termómetro mostrará «Lo» si la temperatura medida del objeto es inferior a 32 °C (89,6 °F).

En el modo de temperatura de superficie, el termómetro mostrará «Lo» si la temperatura medida del objeto es inferior a 0 °C (32 °F).

En el modo de temperatura ambiente, el termómetro mostrará «Lo» si la temperatura medida del objeto es inferior a 0 °C (32 °F).



Este mensaje aparece por varias razones. Consulte a continuación la lista de los principales problemas:

Motivos de la visualización del mensaje LO	Recomendación
Lectura de la temperatura dificultada por el cabello o la transpiración.	Asegúrese de que no haya obstrucciones ni humedad antes de tomar la temperatura.
Temperatura obstaculizada por una corriente de aire o un cambio drástico de la temperatura ambiente.	Asegúrese de que no circule aire en la zona de uso, ya que podría afectar a la lectura de infrarrojos.
Las lecturas de temperatura están demasiado próximas y el termómetro no ha tenido tiempo de reiniciarse.	Haga una pausa de al menos 3-5 segundos entre lecturas; se recomienda una pausa de 15 segundos.
La distancia de medición es demasiado grande.	Realice las mediciones a la distancia recomendada (aprox. 3-5 cm).

XII. SIGNOS Y SÍMBOLOS

Símbolo	Descripción del símbolo
 Spengler TEMPO EASY	Marca registrada
	Indica la necesidad de que el usuario consulte el manual de uso para obtener información de precaución importante, como advertencias y precauciones que, por diversas razones, no pueden presentarse en el propio producto sanitario.
	Pieza de aplicación, tipo BF
	Corriente directa
IP22	Grado de protección contra la entrada nociva de agua y partículas 2 Protegido contra partículas sólidas extrañas a partir de 12,5 mm Ø 2 Protección contra la caída vertical de gotas de agua cuando la CARCASA está inclinada hasta 15°

Símbolo	Descripción del símbolo
	ELIMINACIÓN: No elimine este producto como residuo sin clasificar. Es necesario recoger este tipo de residuos por separado para someterlos a un tratamiento especial.
	Lea las instrucciones atentamente.
	Número de lote
	Fabricante
	Producto sanitario
	Símbolo del representante europeo autorizado, indique expresamente el nombre y la dirección del representante europeo autorizado después del símbolo.
	El etiquetado CE certifica que el producto cumple los requisitos esenciales de la normativa de la UE sobre productos sanitarios.
	Número de modelo
	Fabricado en China
	Importador
	Distribuidor
	Frágil, manipular con cuidado
	Conservar en lugar seco
	Límite de temperatura
	Límite de humedad
	Dirección del embalaje
	No apilar más de 6 cajas
	Número de catálogo
	Número de serie
	Identificador único del aparato
	Fecha de fabricación
	Deseche los envases de una manera ambientalmente amigable.

XIII. DECLARACIÓN EMC

El EQUIPO ME o SISTEMA ME (electromagnético) es adecuado para la asistencia sanitaria a domicilio y los entornos clínicos.

Declaración: El termómetro infrarrojo sin contacto modelo JXB-182 fue probado de acuerdo con las recomendaciones del Informe Técnico IEC TS 60601-4-2: Equipos médicos eléctricos - Parte 4-2: Guía e interpretación - Inmunidad electromagnética; rendimiento de equipos eléctricos médicos y sistemas eléctricos médicos.

Advertencia: No se acerque a equipos quirúrgicos de alta frecuencia activos ni a la sala blindada de RF de un sistema ME para imágenes por resonancia magnética, donde la intensidad de las perturbaciones EM es elevada.

Advertencia: Debe evitarse el uso de este equipo junto a otros equipos o apilado con ellos, ya que podría provocar un funcionamiento incorrecto. Si tal uso es necesario, deben observarse este equipo y los otros equipos para verificar que funcionan normalmente.

Advertencia: El uso de accesorios, transductores y cables distintos de los especificados o suministrados por el fabricante de este equipo podría provocar un aumento de las emisiones electromagnéticas o una disminución de la inmunidad electromagnética de este equipo y ocasionar un funcionamiento incorrecto.

Advertencia: Los equipos portátiles de comunicación por RF (incluidos los periféricos como cables de antena y antenas externas) no deben utilizarse a menos de 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte del equipo JXB-182, incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, podría verse afectado el rendimiento de este equipo.

1. Requisitos generales para la SEGURIDAD BÁSICA y FUNCIONAMIENTO BÁSICO

con respecto a las perturbaciones electromagnéticas para el servicio lite exceptuado. Los equipos portátiles y móviles de comunicación por RF pueden afectar al rendimiento del JXB-182, evitando fuertes interferencias electromagnéticas cuando se utilicen, por ejemplo, cerca de teléfonos móviles, hornos microondas, etc.

2. Orientación y declaración del fabricante - emisiones electromagnéticas e inmunidad.

Tabla 1

Orientación y declaración del fabricante - Emisiones electromagnéticas	
Prueba de emisiones	Conformidad
Emisiones RF CISPR 11	Grupo 1
Emisiones RF CISPR 11	Clase B
Emisiones armónicas IEC 61000-3-2	No procede
Fluctuaciones de tensión / emisiones de parpadeo	No procede
IEC 61000-3-3	No procede

Tabla 2

Orientación y declaración del fabricante - Inmuni- dad electromagnética		
Prueba de inmu- nidad	IEC 60601-1-2	Conformidad
Descarga elec- trostática (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV al contacto ±2 kV, ±4 kV, ±8kV, ±15 kV aire	±8 kV al contacto ±2 kV, ±4 kV, ±8kV, ±15 kV aire
Transitorios elé- ctricos rápidos/ ráfagas IEC 61000-4-4	No procede	No procede
Sobretensión IEC 61000-4-5	No procede	No procede
Caídas de ten- sión, interrup- ciones breves y variaciones de tensión en las líneas de entrada de alimentación IEC 61000-4-11	No procede	No procede
Campo magné- tico de frecuencia de potencia IEC 61000-4-8	30A/m 50Hz/60Hz	30A/m 50Hz/60Hz
Conducida por RF IEC61000-4-6	No procede	No procede
Radiada por RF IEC61000-4-3	10 V/m 80 MHz - 2,7GHz 80 % AM a 2 kHz	10 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80 % AM a 2 kHz
NOTA: UT es la tensión de red de corriente alterna antes de la aplicación del nivel de prueba.		

Tabla 3

Orientación y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética			
Modulación	Modula- ción	Distan- cia (m)	NIVEL DE PRUEBA DE INMUNIDAD(V/M)
Modulación de impulsos 18 kHz	1.8	0.3	27
FM±5 kHz desviación 1 kHz sinusoidal	2	0.3	28
Modulación de impulsos 217 Hz	0.2	0.3	9
Modulación de impulsos 18 kHz	2	0.3	28
Modulación de impulsos 217 Hz	2	0.3	28
Modulación de impulsos 217 Hz	2	0.3	28
Modulación de impulsos 217 Hz	0.2	0.3	9

Tabla 3

Orientación y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética			
Radiada por RF IEC61000-4-3 (Especificaciones de ensayo de la INMUNIDAD DEL PUERTO DE LA CARCASA a los equipos de comunicaciones inalámbricas por RF)	Prueba de frecuencia (MHz)	Banda	Service
	385	380-390	TETRA 400
	450	430-470	GMRS 460 FRS 460
	710	704-787	Bandas LTE 13,17
	745		
	780		
	810	800-960	GSM800/900, TETRA800, CDMA850, banda LTE5
	870		
	930		
	1720	1700-1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; Bandas LTE 1,3,4,25; UMTS
	1845		
	1970		
	2450	2400-2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Banda 7
	5240	5100-5800	WLAN 802.11 a/n
	5500		
	5785		

Tabla 4

Orientación y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética				
RF radiado IEC61000-4-39 (Especificaciones de ensayo para la INMUNIDAD DEL PUERTO DEL RECINTO a los campos magnéticos de proximidad)	Frecuencia del test	Modulación	IEC 60601-1-2 nivel de test (A/m)	Nivel de conformidad (A/m)
	30 kHz	CW	8	8
	134,2 kHz	modulación por pulsos 2.1 kHz	65	65
	13,56 MHz	modulación por pulsos 50 kHz	7,5	7,5

XIV. GARANTÍA / SERVICIO TÉCNICO

De acuerdo con nuestra política de mejora continua de los productos, nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y ópticos sin previo aviso.

Condiciones de garantía y reparación

Garantía: 24 meses.

Póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio técnico en caso de reclamación en garantía. Si tiene que devolver la unidad, adjunte una copia del recibo e indique cuál es el defecto.

Se aplican las siguientes condiciones de garantía:

1. El periodo de garantía de los productos Spengler es de 24 meses a partir de la fecha de compra. En caso de reclamación en garantía, la fecha de compra debe demostrarse mediante el recibo de compra o la factura.

2. Los defectos de material o mano de obra se eliminarán de forma gratuita dentro del periodo de garantía.

3. Las reparaciones en garantía no prolongan el periodo de garantía ni de la unidad ni de las piezas de recambio.

4. Quedan excluidos de la garantía:

a. Todos los daños que se hayan producido debido a un tratamiento inadecuado, por ejemplo, el incumplimiento del manual de uso.

b. Todos los daños debidos a reparaciones o manipulaciones por parte del cliente o de terceros no autorizados.

c. Daños producidos durante el transporte entre el fabricante y el consumidor o durante el transporte al centro de servicio.

d. Accesorios sometidos a un desgaste normal.

5. Quedan excluidas las responsabilidades por pérdidas consecuenciales directas o indirectas causadas por la unidad, incluso si el daño de la unidad se acepta como reclamación de garantía.

• GUANGZHOU BERRCOM MEDICAL DEVICE CO., Ltd declina expresamente toda garantía de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado.

• Bajo ninguna circunstancia Spengler tendrá obligación o responsabilidad alguna por lucro cesante o daños consecuenciales, incidentales indirectos, especiales, punitivos o contingentes de cualquier tipo en relación con las reclamaciones realizadas por cualquier cliente, consumidor u otro usuario de los productos Spengler.

• En caso de que alguna ley aplicable imponga garantías, condiciones u obligaciones que no puedan excluirse o modificarse, este párrafo se aplicará en la mayor medida permitida por dichas leyes.

XV. ELIMINACIÓN



No se pueden eliminar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos como residuos urbanos sin clasificar y deben recogerse por separado.

De conformidad con la Directiva 2012/19/UE y las normativas nacionales sobre eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos, le informamos de que estos artículos deben eliminarse de forma especial dentro de la Unión Europea (UE). Esta normativa obliga a reciclar y eliminar de forma respetuosa con el medio ambiente los aparatos eléctricos y electrónicos. Estos objetos no deben eliminarse como basura doméstica. Esto se ha expresado utilizando el icono de la «papelera tachada».



El termómetro de infrarrojos sin contacto (Modelo: JXB-182) contiene pilas y residuos electrónicos reciclables. Para proteger el medio ambiente, no lo tire a la basura doméstica como residuo sin clasificar, recójalo por separado y llévelo a un centro de eliminación de residuos local adecuado.


El termómetro de infrarrojos sin contacto (Modelo: JXB-182) está clasificado como equipo pequeño (5ª categoría) según el ANEXO IV de la Directiva 2012/19/UE.

Antes de desechar su termómetro de infrarrojos sin contacto (Modelo: JXB-182), retire las pilas del termómetro de infrarrojos sin contacto (Modelo: JXB-182) y deseche las pilas y el termómetro de infrarrojos sin contacto (Modelo: JXB-182) por separado.

Puede retirar las pilas de la siguiente manera:

➔ Diagrama de extracción de las pilas

- ① Abra la tapa de la parte posterior del aparato
- ② Retire las pilas.

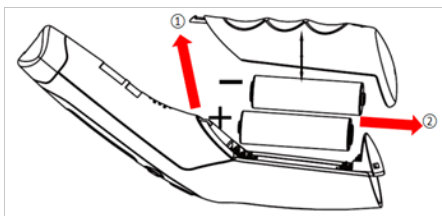

Las pilas representan un peligro para la salud y el medio ambiente. Nunca abra, dañe o trague las pilas ni permita que contaminen el medio ambiente. Pueden contener metales pesados tóxicos y peligrosos para el medio ambiente. Las pilas retiradas se eliminarán en el lugar de venta o en los contenedores correspondientes proporcionados en los puntos de recogida por las autoridades locales de residuos públicos y se tratarán de acuerdo con la Directiva 2006/66/CE.

Las pilas y los residuos electrónicos reciclables se depositarán en un contenedor de residuos separados.

Los materiales de embalaje deben eliminarse de acuerdo con la normativa local. Consulte los puntos de recogida autorizados para obtener más información.

Alemania

Para la eliminación de residuos electrónicos reciclables, puede buscar los puntos de recogida autorizados en la siguiente página web:

https: //www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen

Para la eliminación de residuos electrónicos reciclables, puede buscar los puntos de recogida autorizados en la siguiente página web:

https: //www.ear-system.de/ear-verzeichnis/battghersteller#no-back

Método de búsqueda: utilizando su código postal o el nombre de la ciudad y el estado donde vive podrá encontrar puntos de recogida cerca de usted.

Otros países

Para obtener información específica sobre la eliminación en su país, póngase en contacto con su distribuidor o importador local.

TEMPO EASY

تمبو إيزي

ميزان الحرارة يعمل بالأشعة تحت الحمراء غير تلامسي

دليل المستخدم

SPENGLER MEDICAL

العنوان: 30 شارع جان دي جيراماند

إيكس أون بروفانس، فرنسا 13290



شركة قوانغتشو بيركوم للأجهزة الطبية المحدودة

العنوان: رقم 38 طريق هوانزن شي، داغانغ

بلدة، نانشا، 511470 قوانغتشو، قوانغدونغ

جمهورية الصين الشعبية

الهاتف: 86+(20)34938449

البريد الإلكتروني: service@berrcom.com



شركة شنغهاي الدولية القابضة المحدودة

(أوروبا)

العنوان: إيفستراسي 80، 20537 هامبورغ

ألمانيا



CE 0123

ملحوظة

يجب قراءة كتيب التعليمات بدقة قبل الاستخدام وإتباع كل التعليمات الواردة فيه.

احتفظ بالتعليمات لاستخدامها لاحقاً.

يجب عليك التحقق من وظائف الجهاز وفقاً لدليل التعليمات قبل كل استخدام، ولا تستخدم هذا الجهاز إلا إذا كان يعمل بشكل جيد.

المحتويات

1. الاستخدام المقصود .64
2. التحذيرات والاحتياطات .64
3. مبدأ تشغيل مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء .65
- غير التلامسي
4. وصف المنتج .65
5. كيف تستخدم مقياس الحرارة الذي يعمل بالأشعة تحت .66
- الحمراء غير التلامسي
6. تشغيل وضبط مقياس الحرارة .66
7. المواصفات الفنية .68
8. البطاريات .69
9. العناصر المرفقة عند التسليم .69
10. التنظيف و التطهير .69
11. تشخيص المشاكل وإصلاحها .71
12. الإشارات و الرموز .72
13. إعلان المطابقة .73
14. الضمان/الخدمة .76
15. التخلص من النفايات .77



- | | |
|-------------------------|-------|
| • VERSION FRANÇAISE | P. 2 |
| • ENGLISH VERSION | P. 22 |
| • VERSIÓN ESPAÑOLA | P. 42 |
| • النسخة العربية | ص. 62 |
| • SUOMENKIELINEN VERSIO | S.80 |

1. الاستخدام المقصود

الجهاز عبارة عن مقياس الحرارة يعمل بالأشعة تحت الحمراء مخصص لقياس درجة حرارة الجبهة للأطفال والبالغين دون ملامسة جسم الإنسان. يستطيع المستهلكون استخدامه في المنازل والأطباء في العيادات كمرجع.

2. التحذيرات والاحتياطات



- استخدم مقياس الحرارة فقط بعد قراءة وفهم تعليمات الاستخدام.
- استخدم مقياس الحرارة فقط للغرض المحدد والموضح في دليل التعليمات. سوء الاستخدام سيؤدي إلى إلغاء الضمان.
- استخدم مقياس الحرارة فقط للأغراض المهنية أو الاستخدام الشخصي في المنزل.
- استخدم مقياس الحرارة لا يغني عن استشارة الطبيب. لا تقم بتشخيص نفسك أو علاج نفسك بناءً على القياسات دون استشارة طبيبك.
- يرجى بشكل خاص عدم البدء في تناول أي دواء جديد أو تغيير نوع و/أو جرعة أي دواء حالي دون الحصول على موافقة مسبقة.
- يرجى بشكل خاص عدم البدء في تناول أي دواء جديد أو تغيير نوع و/أو جرعة أي دواء حالي دون استشارة طبيبك والحصول على موافقته.
- يقوم البالغون فقط بتشغيل مقياس الحرارة ويجب الاحتفاظ به بعيداً عن متناول الأطفال.
- تأكد من عدم استخدام الأطفال لمقياس الحرارة دون إشراف من الكبار؛ حيث إن بعض الأجزاء صغيرة بدرجة قد تشكل خطر الاختناق أو قد يتم ابتلاعها.
- إذا تم تخزين مقياس الحرارة في مكان أكثر برودة أو دفئاً من المكان الذي يتم استخدامه فيه، فيرجى وضعه في المكان الذي سيستخدم فيه لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل إجراء القياس.
- بعد القيام بنشاط بدني، أو الاستحمام، أو قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق، انتظر لمدة 30 دقيقة تقريباً قبل قياس درجة الحرارة من جبهتك.
- لضمان دقة القياس، يجب عليك استخدام مقياس الحرارة داخل الأماكن المغلقة فقط عندما يتراوح نطاق درجة الحرارة المحيطة بين 10 درجات مئوية (50 درجة فهرنهايت) و 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).
- يجب تنظيف مقياس الحرارة وفقاً لمتطلبات هذا الدليل لتجنب احتمالية الإصابة بالعدوى البكتيرية، قبل وبعد استخدامه.
- لا تعرض مقياس الحرارة للصدمات الكهربائية.
- لا تعرض مقياس الحرارة لدرجات حرارة شديدة تزيد 20 درجة مئوية تحت الصفر (4 درجات فهرنهايت تحت الصفر).
- لا تستخدم مقياس الحرارة في ظروف الرطوبة النسبية التي تزيد عن 85%.
- لا تضع هذا المنتج في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة، أو درجة حرارة عالية، أو رطوبة عالية، أو غبار مفرط، أو مكان قد يتلامس فيه مع الغازات أو السوائل المسببة للتآكل. لا تستخدم هذا المنتج في البيئة الموصوفة سابقاً.
- لا تسقط مقياس الحرارة.
- لا تلمس زجاج مستشعر الأشعة تحت الحمراء بأصابعك لأنه هش للغاية وقد يسبب إصابة.
- لا تستخدم مقياس الحرارة إذا كان تالفاً.
- لا تفتح مقياس الحرارة. إنه يحتوي على أجزاء صغيرة قد يبتلعها الأطفال.

- لا تغمر الجهاز أبدًا في الماء أو أي سائل تنظيف أخرى، ولا تسمح لأي سائل بدخول الجزء الداخلي من هذا المنتج.
- قم بإزالة البطاريات إذا كنت لا ترغب في استخدام الجهاز لفترة زمنية طويلة؛ وإلا، سيكون هناك خطر تسرب البطارية.
- احتفظ بمقياس الحرارة بعيدًا عن المجالات المغناطيسية التي تنتجها بعض الأجهزة مثل أفران الميكروويف أو أجهزة اللحام بالقوس الكهربائي أو سخانات الحث.
- يجب عدم إعادة استخدام الجهاز بعد انتهاء فترة الخدمة المتوقعة له (وهي 5 سنوات من تاريخ الإنتاج). راجع الفصل الخامس عشر للتخلص من الجهاز.
- تحتوي المكونات الكهربائية والبطاريات على معادن ثقيلة أو مواد كيميائية قد تسبب ضررًا للبيئة، لذا يرجى اتباع القانون واللوائح المحلية للتخلص منها.
- يمكنك الاتصال بالشركة المصنعة أو الوكيل الخاص بك فيما يتعلق بالحالات التالية:
- في حالة حدوث خطأ أو حالة تلف الترمومتر: لا تحاول إصلاح مقياس الحرارة بنفسك، لأن هذا سيؤدي إلى إلغاء الضمان. يجب أن تجري الإصلاحات فقط بواسطة شركاء الخدمة المعتمدين. ستوفر الشركة المصنعة، عند الطلب، مخططات الدوائر الكهربائية، وقوائم بأجزاء المكونات، والموصفات، وتعليمات المعايرة، أو أي معلومات أخرى تساعد موظفي الخدمة في إصلاح تلك الأجزاء من المعدات الطبية الكهربائية التي تحددها الشركة المصنعة التي يمكن لموظفي الخدمة إصلاحها.
- إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إعداد أو استخدام أو صيانة مقياس الحرارة.
- إذا كان لديك عمليات أو أحداث غير متوقعة ترغب في الإبلاغ عنها.

3. مبدأ تشغيل مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء غير التلامسي

جميع الأجسام، سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية، تصدر طاقة عن طريق الإشعاع. تعتمد كثافة هذه الطاقة على درجة حرارة هذا الجسم. وبالتالي، فإن مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء قادر على قياس درجة حرارة الشخص من خلال الطاقة المنبعثة منه. يمكن إجراء هذا القياس بفضل مسبار درجة الحرارة الخارجي الموجود على الجهاز، والذي يقوم بتحليل درجة الحرارة المحيطة وتسجيلها بشكل دائم. لذا، بمجرد أن يمسك المشغل بالمقياس الحرارة بالقرب من الجسم ويفعل مستشعر الإشعاع، يتم أخذ القياس على الفور من خلال اكتشاف حرارة الأشعة تحت الحمراء الناتجة عن تدفق الدم في الشرايين. وبالتالي، يمكن قياس درجة حرارة الجسم دون أي تدخل من حرارة البيئة المحيطة.

4. وصف المنتج



5. كيف تستخدم مقياس الحرارة الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء غير التلامسي

كيفية قياس درجة الحرارة
قم بتوجيه المؤشر إلى الجبهة، فوق المنطقة الصدغية اليمنى، من مسافة حوالي 3 سم إلى 5 سم، ثم اضغط على زر القياس في مقياس الحرارة، وسيتم عرض درجة الحرارة على الفور. يرجى مراعاة ما يلي قبل قياس درجة الحرارة لضمان نتيجة مستقرة وموثوقة:

- أزح الشعر للخلف بعيدًا عن الجبهة
- امسح العرق من الجبهة
- تجنب أي تيارات هوائية (على سبيل المثال من فتحات الأنف، أو مكيف الهواء...)
- يجب ترك فاصل زمني مدته دقيقة واحدة بين كل قياسين لأفراد مختلفين.
- في كل مرة يحدث فيها تغيير كبير في درجة الحرارة المحيطة بسبب حدوث تغيير في البيئة، يجب إتاحة الفرصة لمقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء غير التلامسي "إيزي إيزي" حتى يتكيف مع درجة الحرارة المحيطة لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل استخدامه.



- **الحصول على نتائج موثوقة:**
- لا تحاول قياس درجة حرارة شخص ما عن طريق توجيه الجهاز إلى جزء آخر من الجسم غير الجبهة (أي الذراعين، والساقين، والجذع، وما إلى ذلك).
- لا تحرك مقياس الحرارة قبل ظهور النتيجة النهائية.
- لا تحاول قياس درجة حرارة شخص قريب من التيارات الهوائية (مثل الرياح أو التكييف أو المراوح).
- لا تحاول قياس درجة حرارة أي شخص بعد وقت قصير من مشاركته في نشاط بدني مكثف، أو بعد الاستحمام، أو تناول الأدوية، أو الأكل أو الشرب، أو استخدام كمادات دافئة أو باردة على جبينه.
- لا تحاول قياس درجة حرارة أي شخص عند حدوث تغيير كبير في الظروف المحيطة. يجب إتاحة الفرصة للجهاز حتى يتكيف مع التغيير الكبير في درجة الحرارة المحيطة الناتج عن التغيير في البيئة لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل قياس الحرارة.
- انتظر من 3 إلى 5 ثواني على الأقل بين القياسات.
- نوصي بأخذ ثلاثة قياسات على الجبهة. إذا كانت النتائج الثلاثة مختلفة، اعتمد القياس الأعلى قيمة.

6. تشغيل وضبط مقياس الحرارة

1. تركيب البطارية.
2. في حالة الاستخدام لأول مرة أو عند تركيب بطاريات جديدة، انتظر 10-15 دقائق لضمان استقرار الجهاز وتشغيله بشكل صحيح.
3. قم بتوجيه مقياس الحرارة نحو الجبهة (انظر الرسم البياني أدناه الذي يوضح وضعية تمبو إيزي)، من مسافة تتراوح بين 3 سم و 5 سم، ثم اضغط على مفتاح القياس، وسيتم عرض درجة الحرارة خلال ثانية واحدة.
4. قبل قياس درجة الحرارة، تأكد من إزالة الشعر والتعرق من الجبهة.
5. قم بتشغيل الجهاز
6. في حالة التشغيل، اضغط على زر "SCAN"، بعد ثانية واحدة من ظهور لوحة الشاشة بالكامل، ستدخل وضع الاستعداد مع علامة "C°" أو "F°".
7. ثم اضغط على زر "SCAN" مرة أخرى، ستحصل على نتيجة القياس خلال ثانية واحدة. ولكن في حالة عدم إجراء أي قياسات أخرى، سيتم إيقاف التشغيل تلقائيًا خلال 30 ثانية.
8. في حالة التشغيل، قم بتعيين الوضع
9. أ- اضغط على الزر "MODE"، وسوف تعرض الشاشة: درجة حرارة الجسم... درجة مئوية
10. ب- اضغط مرة أخرى على الزر "MODE"، وسوف

تعرض الشاشة: درجة حرارة السطح ... درجة مئوية
ت- اضغط مرة أخرى على الزر "MODE"، وسوف
تعرض الشاشة: درجة حرارة الغرفة ... درجة مئوية
ملحوظة: درجة حرارة السطح ودرجة حرارة الغرفة ليست
للاستخدام الطبي.

7. ذاكرة البيانات
عندما يكون الجهاز قيد التشغيل، اضغط على زر "MEM"،
حيث ستظهر آخر درجة حرارة
وستتمكن من الاطلاع على آخر 32 قياسًا.

8. مسح الذاكرة
عندما يكون الجهاز قيد التشغيل، اضغط على زر "MEM"
واستمر في الضغط عليه لمدة 5 ثوانٍ، وسيتم مسح جميع
البيانات الموجودة في
الذاكرة. ثم اضغط على زر "MEM" مرة أخرى، وستظهر
على الشاشة كلمة "CLR".

9. وظيفة التنبيه بارتفاع درجة الحرارة
في وضع قياس درجة حرارة الجسم، إذا كانت درجة حرارة
الجسم المقاسة أعلى من أو
تساوي 38 درجة مئوية، سيصدر الجهاز صوتًا متواصلًا.

10. تختلف درجة حرارة السطح عند درجة حرارة الجسم.
للحصول على درجة حرارة الجسم، عليك استخدام "وضع
درجة حرارة الجسم". استخدم وضع قياس درجة حرارة
السطح لقياس درجة حرارة زجاجة حليب الطفل أو ماء
الاستحمام، ووضع قياس درجة حرارة الغرفة لقياس درجة
حرارة الغرفة.

11. في حالة التشغيل، اضغط على " " لتفعيل أو
إيقاف الطنان. عندما تعرض الشاشة "ON"، يتم فتح الطنان.
وعندما تعرض "OFF"، يتم إيقاف الطنان.


7. المواصفات الفنية

البنود	المواصفات
البطارية	التيار المستمر 3 فولت (2 بطارية AA)
مستشعر الحرارة	مستشعر الأشعة تحت الحمراء
مسافة القياس	3سم - 5 سم (1.2 بوصة - 2 بوصة)
دقة القياس	وضع قياس درجة حرارة الجسم: 32.0 درجة مئوية ~ 43.0 درجة مئوية (89.6 درجة فهرنهايت ~ 109.4 درجة فهرنهايت) وضع قياس درجة حرارة السطح: 0 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت ~ 140 درجة فهرنهايت) وضع قياس درجة حرارة الغرفة: 0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت ~ 104 درجة فهرنهايت)
دقة القياس	وضع قياس درجة حرارة الجسم: 32.0 درجة مئوية ~ 34.9 درجة مئوية (89.6 درجة فهرنهايت ~ 94.8 درجة فهرنهايت) ± 0.3 درجة مئوية (± 0.6 درجة فهرنهايت) 35.0 درجة مئوية ~ 42.0 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت ~ 107.6 درجة فهرنهايت): ± 0.2 درجة مئوية (± 0.4 درجة فهرنهايت) 42.1 درجة مئوية ~ 43.0 درجة مئوية (107.8 درجة فهرنهايت ~ 109.4 درجة فهرنهايت): ± 0.3 درجة مئوية (± 0.6 درجة فهرنهايت)
التكرار السريري	≥ 0.2 درجة مئوية (0.4 درجة فهرنهايت)
دقة الشاشة	0.1 درجة مئوية (0.1 درجة فهرنهايت)
زمن القياس	ثانية واحدة
الذاكرة	32 قياس
ظروف الاستخدام	درجة حرارة البيئة المحيطة: 10 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية (50 درجة فهرنهايت ~ 104 درجة فهرنهايت) RH الرطوبة النسبية: 85% الضغط الجوي: 700 ~ 1060 هكتوباسكال
ظروف التخزين والنقل	درجة حرارة البيئة المحيطة: -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت ~ 131 درجة فهرنهايت) RH الرطوبة النسبية: ≥ 95 الضغط الجوي: 700 ~ 1060 هكتوباسكال
الوزن	(حوالي 80 جرام (بدون البطارية)
حجم المنتج	حوالي: 175 × 50 × 52 ملم (الطول × العرض × الارتفاع)
العمر الافتراضي	5 سنوات
إيقاف التشغيل تلقائيًا	≥ 30 ثانية
مكان القياس	الجبهة
الجزء المرجعي من الجسم	الإبط
وضع التشغيل	الوضع التكميلي

8. البطاريات

1. تغيير البطاريات

العملية: افتح الغطاء واستبدل البطاريات مع التأكد بدقة من وضعها بشكل صحيح. قد يتسبب أي خطأ في تلف الجهاز وقد يؤثر على ضمان جهازك "مقياس الحرارة تمبو إيزي الذي يعمل بالأشعة الحمراء بدون تلامس" لا تستخدم البطاريات القابلة لإعادة الشحن مطلقاً. استخدم فقط البطاريات ذات الاستخدام الواحد.

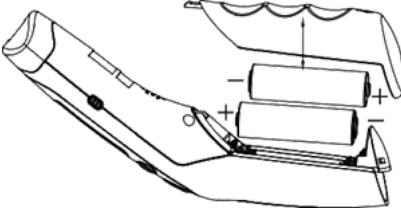

2. التخلص من البطاريات

لحماية البيئة، يجب التخلص من البطاريات الفارغة في مواقع التجميع المناسبة وفقاً للوائح الوطنية أو المحلية. طريقة التخلص من البطاريات موضحة في الفصل الخامس عشر.

ملحوظات حول التعامل مع البطاريات

- إذا لامس سائل البطارية جلديك أو عينيك، أشطف المنطقة المتأثرة بالماء واطلب المساعدة الطبية.
- **خطر الاختناق!** قد يبتلع الأطفال الصغار البطاريات مما يسبب لهم الاختناق. احتفظ بالبطاريات بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.
- إذا حدث تسرب من البطارية، ارتدّ قفازات واقية وقم بتنظيف مكان البطارية بقطعة قماش جافة.
- احم البطاريات من درجات الحرارة المرتفعة.
- **خطر الانفجار!** لا تلقى البطاريات في النار.
- استخدم نفس النوع من البطاريات أو ما يعادلها فقط.
- استبدل كل البطاريات دائماً في نفس الوقت.
- لا تستخدم البطاريات القابلة لإعادة الشحن.
- لا تقم بتفكيك أو تقسيم أو سحق البطاريات.

9. العناصر المرفقة عند التسليم

- عدد 1 مقياس الحرارة
- عدد 1 دليل المستخدم
- عدد 2 بطارية AA

10. التنظيف والتطهير

مقياس الحرارة هو جهاز قابل لإعادة الاستخدام على العديد من المرضى، وقد تم التحقق من تعليمات التنظيف والتطهير. يرجى اتباع تعليمات تطهير/تنظيف مقياس الحرارة قبل الاستخدام.

التنظيف:

- (1) استخدم قطعة قطن مبللة بالماء الساخن أو منظف محايد لتنظيف غلاف مقياس الحرارة ومسبار القياس بالكامل لإزالة البقع أو الزيت.

(2) افحص مقياس الحرارة فحوصًا بصريًا بعد عملية التنظيف، وتأكد أنه لا توجد أتربة أو بقع عليه. إذا تقرر أن الجهاز ليس نظيفًا بعد الفحص البصري في نهاية خطوة التنظيف، يجب عليك إما تكرار خطوات التنظيف السابقة أو التخلص من الجهاز بأمان لضمان عدم استخدام جهاز متسخ بشكل واضح مرة أخرى.

التطهير:

(1) قم بتطهير غلاف مقياس الحرارة والمسبار لمدة 30 ثانية باستخدام قطعة قطن أو قطعة قماش خالية من الغبار مغموسة في إيثانول بتركيز 75%.

(2) كرر الخطوات المذكورة أعلاه 3 مرات على الأقل، ثم امسح السطح والمسبار حتى يجف بقطعة قماش نظيفة، وانتظر لمدة دقيقة تقريبًا حتى يجف بعد عملية التطهير.

ملحوظة:

- تأكد مع عدم دخول أية سوائل داخل مقياس الحرارة.
- لا تستخدم أبدًا مواد تنظيف كاشطة أو مذيبات أو البنزين للتنظيف، ولا تغمر مقياس الحرارة في الماء أو سوائل تنظيف أخرى.
- احرص على عدم خدش سطح عدسة المسبار والشاشة.
- إذا أظهر الفحص البصري تدهورًا غير مقبول في الجهاز مثل التآكل أو تغير اللون أو الحفر أو التشقق، يجب عدم استخدام الجهاز بعد ذلك والتخلص منه.
- إذا تم استخدام مقياس الحرارة على المرضى، يرجى فحص مقياس الحرارة بصريًا لتحديد ما إذا كان هناك بقع أو زيت على الغلاف أو المسبار بعد كل استخدام، واتبع تعليمات التنظيف والتطهير لتنظيف مقياس الحرارة الخاص بك.

لعاية والصيانة

- يرجى تنظيف مقياس الحرارة بانتظام، مرة واحدة في الشهر عادةً.
- في حالة تلف طرف المسبار، يرجى الاتصال بمركز الصيانة.
- إذا لزم الأمر، يمكنك تنظيف مقياس الحرارة بشكل مناسب حسب مستوى الاتساخ؛ وإذا لم تقم باستخدام هذا المنتج لفترة طويلة (أكثر من شهرين)، ينصح بإزالة جميع البطاريات واستبدالها.
- قم بتخزين مقياس الحرارة في مكان جاف خالٍ من الغبار والتلوث وبعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
- لا تستخدم بطاريات غير البطاريات المحددة هنا، ولا تستخدم بطاريات قابلة لإعادة الشحن، ولا تلقيها في النار.
- لا تعرض مقياس الحرارة لأشعة الشمس أو الماء.
- لا تستخدم مقياس الحرارة بطريقة غير لائقة. السقوط أو التصادم أو الصدمات الشديدة ستسبب في تلف المنتج.

المعايرة:

يتم معايرة هذا المقياس الحراري عند تصنيعه، ويحتاج إلى فحص سنوي للتأكد من سلامة مقياس الحرارة الطبي الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء. إذا شككت في أي وقت في دقة القياس، يرجى الاتصال بالبائع على الفور.


يجب أن تتم عملية معايرة هذا المنتج باستخدام معدات المعايرة المناسبة، وإلا فإنه لا يمكن معايرته بمفرده.

11. تشخيص المشاكل وإصلاحها

إذا واجهت أي مشكلة عند استخدام مقياس الحرارة، يرجى مراجعة هذا الدليل لمساعدتك في حل المشكلة. إذا لم تتمكن من حل المشكلة، يرجى الاتصال بخدمة العملاء.

الشاشة تعرض الرسالة HI

في وضع قياس درجة حرارة الجسم، سوف تعرض شاشة مقياس الحرارة رسالة "HI" إذا كانت درجة حرارة العنصر التي يتم قياسها أعلى من 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت). في وضع قياس درجة حرارة الغرفة، سوف تعرض شاشة مقياس الحرارة رسالة "HI" إذا كانت درجة حرارة البيئة المحيطة التي يتم قياسها أعلى من 43 درجة مئوية (109 درجة فهرنهايت).

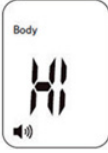

في وضع قياس درجة حرارة السطح، سوف تعرض شاشة مقياس الحرارة رسالة "HI" إذا كانت درجة حرارة العنصر التي يتم قياسها أعلى من 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت). في وضع قياس درجة حرارة الغرفة، سوف تعرض شاشة مقياس الحرارة رسالة "HI" إذا كانت درجة حرارة البيئة المحيطة التي يتم قياسها أعلى من 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).

الشاشة تعرض الرسالة LO

في وضع قياس درجة حرارة الجسم، سوف تعرض شاشة مقياس الحرارة رسالة "Lo" إذا كانت درجة حرارة الجسم التي يتم قياسها أقل من 32 درجة مئوية (89 درجة فهرنهايت).



في وضع قياس درجة حرارة الجسم، سوف تعرض شاشة مقياس الحرارة رسالة "Lo" إذا كانت درجة حرارة العنصر التي يتم قياسها أقل من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت). في وضع قياس درجة حرارة الغرفة، سوف تعرض شاشة مقياس الحرارة رسالة "Lo" إذا كانت درجة حرارة البيئة المحيطة التي يتم قياسها أقل من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت). تظهر هذه الرسالة لأسباب مختلفة. يرجى مراجعة قائمة المشكلات التالية:

أسباب عرض رسالة	النصائح
قراءة درجة الحرارة قد تتأثر بالشعر أو العرق	تأكد من عدم وجود أي عوائق أو تعرق قبل قياس درجة الحرارة
قراءة درجة الحرارة قد تتأثر بسبب تيار الهواء أو التغير المفاجئ في درجة حرارة البيئة المحيطة	تأكد من عدم وجود تيار هواء في منطقة الاستخدام، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على قراءة الأشعة تحت الحمراء
قراءات درجة الحرارة متقاربة جدًا، ولم يتوفر الوقت الكافي لمقياس الحرارة لإعادة التشغيل	يجب الانتظار لمدة 3-5 ثوانٍ على الأقل بين القراءات؛ ويفضل الانتظار لمدة 15 ثانية
مسافة القياس كبيرة جدًا	خذ قياسات درجة الحرارة من المسافة الموصى بها (حوالي 3-5 سم)

12. الإشارات و الرموز

الرموز	وصف الرموز
 Spengler TEMPO EASY	العلامة التجارية
	تشير إلى ضرورة رجوع المستخدم لتعليمات الاستخدام للإطلاع على معلومات تحذيرية هامة مثل التحذيرات والاحتياطات التي لا يمكن عرضها على الجهاز الطبي نفسه لأسباب مختلفة.
	الجزء الملامس للجسم، النوع BF
	تيار مستمر
IP22	مؤشر الحماية الممنوح من الغلاف الخارجي
	التخلص من المنتج: لا تتخلص من هذا المنتج كنفائيات بلدية غير مصنفة. لابد من تجميع مثل تلك النفائيات بشكل منفصل لمعالجتها بطريقة خاصة.
	يرجى قراءة التعليمات بعناية
LOT	رقم الدفعة
	الشركة المصنعة
MD	جهاز طبي
EU REP	رمز الممثل الأوروبي المفوض، يشير بوضوح إلى اسم وعنوان الممثل الأوروبي المفوض بعد الرمز.
CE 0123	تؤكد علامة CE أن المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية للوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالأجهزة الطبية.
#	رقم الموديل
	صنع في الصين
	المستورد
	الموزع
	قابل للكسر، تعامل معه بحذر
	يُحفظ جافًا
	حدود درجة الحرارة
	حدود الرطوبة
	اتجاه التعبئة والتغليف
	لا تضع أكثر من 6 صناديق فوق بعضها
REF	رقم الكتالوج
SN	الرقم التسلسلي
UDI	الرقم المميز للمعرف للجهاز
	تاريخ التصنيع
	تخلص من العبوات بطريقة مسؤولة بيئيًا

13. بيان التوافق الكهرومغناطيسي

مناسب لبيئات الرعاية الجهاز الطبي الكهربائي أو النظام الطبي الكهربائي الصحية في المنازل والعيادات.

بيان: تم اختبار نموذج مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء بدون تلامس JXB-182 وفقاً لتوصيات التقرير الفني IEC TS 60601-4-2: المعدات الكهربائية الطبية – الجزء 4-2: التوجيه والتفسير – المناعة الكهرومغناطيسية؛ أداء المعدات الكهربائية الطبية والأنظمة الكهربائية الطبية.

تحذير: لا تقترب من معدات الجراحة عالية التردد النشطة أو الغرف المحمية من الترددات الراديوية والمخصصة لنظام الأجهزة الطبية للتصوير بالرنين المغناطيسي، حيث تكون كثافة الاضطرابات الكهرومغناطيسية عالية.

تحذير: تجنب استخدام هذا الجهاز بجانب أو فوق أجهزة أخرى، حيث قد يؤدي ذلك إلى عمله بشكل غير صحيح. إذا كان هذا الاستخدام بهذا الشكل ضرورياً، فيجب مراقبة هذه المعدات والمعدات الأخرى للتأكد من أنها تعمل بشكل طبيعي.

تحذير: استخدام الإكسسوارات والمحولات والكابلات غير التي حددتها أو خصصتها الشركة المصنعة لهذا الجهاز قد يؤدي إلى زيادة الانبعاثات الكهرومغناطيسية أو تقليل المناعة الكهرومغناطيسية للجهاز، مما قد يتسبب في عمله بشكل غير صحيح.

تحذير: يجب عدم استخدام معدات الاتصال اللاسلكي المحمولة (بما في ذلك الملحقات مثل كابلات الهوائيات والهوائيات الخارجية) على مسافة أقل من 30 سم (12 بوصة) من أي جزء من الجهاز JXB-182، بما في ذلك الكابلات التي حددتها الشركة المصنعة. وإلا، سيؤدي ذلك إلى انخفاض أداء الجهاز.

1. جميع التعليمات اللازمة للحفاظ على السلامة الأساسية والأداء الأساسي

فيما يتعلق بالتداخلات الكهرومغناطيسية طوال مدة الخدمة المتوقعة. قد تؤثر معدات الاتصال اللاسلكي المحمولة والمتحركة على أداء جهاز JXB-182، لذا يجب تجنب التعرض للتداخل الكهرومغناطيسي القوي أثناء الاستخدام، مثل التواجد قرب الهواتف المحمولة، وأفران الميكروويف، وغيرها.

2. الإرشادات وإعلان الشركة المصنعة - الانبعاثات الكهرومغناطيسية والمناعة ضدها

الجدول 1

الإرشادات وإعلان الشركة المصنعة - الانبعاثات الكهرومغناطيسية	
إختبار الانبعاثات	الامتثال
المحدد لاختبار CISPR 11 المعيار انبعاثات الترددات الراديوية	المجموعة 1
المحدد لاختبار CISPR 11 المعيار انبعاثات الترددات الراديوية	الفئة ب
المعيار IEC 61000-3-2 المحدد لاختبار انبعاثات التوافقيات	لا ينطبق
تقلبات الجهد / انبعاثات الوميض IEC 61000-3-3	لا ينطبق

الجدول 2

الإرشادات وإعلان الشركة المصنعة - المناعة الكهرومغناطيسية		
اختبار المناعة	IEC 60601-1-2 مستوى الاختبار	مستوى الامتثال
معيار IEC 61000-4-2 الذي يحدد اختبار التفريغ الكهروستاتيكي	± 8 كيلو فولت عند التلامس ± 2 كيلو فولت، ± 4 كيلو فولت، ± 8 كيلو فولت، ± 15 كيلو فولت (في الهواء)	± 8 كيلو فولت عند التلامس ± 2 كيلو فولت، ± 4 كيلو فولت، ± 8 كيلو فولت، ± 15 كيلو فولت (في الهواء)
IEC 61000-4-4 معيار الذي يحدد اختبار النبضات الكهربية السريعة	لا ينطبق	لا ينطبق
IEC 61000-4-5 معيار الذي يحدد الجهد الزائد	لا ينطبق	لا ينطبق
IEC 61000-4-11 المعيار الذي يحدد اختبار انخفاضات الجهد، والانقطاعات القصيرة، والتقلبات في الجهد على خطوط تغذية الطاقة	لا ينطبق	لا ينطبق
IEC 61000-4-8 المعيار الذي يحدد اختبار مقاومة الأجهزة للحقول المغناطيسية ذات التردد الكهربائي	أمبير/متر 30 هرتز 60/هرتز 50	30 أمبير/متر 50 هرتز/60 هرتز
RF المعيار الدولي IEC61000-4-6 الذي يحدد اختبار التداخل الراديوي	لا ينطبق	لا ينطبق
RF المعيار الدولي IEC61000-4-3 الذي يحدد اختبار التداخل الكهرومغناطيسي الراديوي الموجه	10 فولت/م 80 ميغا هرتز - 2.7 جيجا هرتز 80% تعديل في السعة عند 2 كيلو هرتز	فولت/م 10 ميغا هرتز - 2.7 جيجا هرتز 80% تعديل في السعة عند 80% عند 2 كيلو هرتز
ملحوظة: UT هو جهد التيار المتردد الفعال قبل تطبيق مستوى الاختبار.		

الجدول 3

الإرشادات وإعلان الشركة المصنعة - المناعة الكهرومغناطيسية			
المعيار RF الدولي IEC61000- 4-3 الذي يحدد اختبار التداخل الكهرومغناطيسي الراديو الموجة مواصفات اختبار مناعة منفذ الصناديق الحماية لمعدات الاتصالات اللاسلكية ذات الترددات (الراديوية)	تردد الاختبار (ميغا هرتز)	الموجة (ميغا هرتز)	الخدمة
	385	380-390	تيترا 400
	450	430-470	خدمة الراديو المتنقلة العامة 460 خدمة الراديو للعائلات والأفراد 460
	710	704-787	نطاقات التردد المستخدمة LTE 13,17 في شبكات
	745		
	780		
	810	800-960	GSM800/900 نظام إدارة الهواتف (TETRA800)، (المحمولة)، (نظام تيترا) تكنولوجيا (CDMA850) الوصول المتعدد بتقسيم LTE 5 الشيفرة)، النطاق
	870		
	930		
	1720	1700- 1990	نظام GSM1800 إدارة الهواتف المحمولة؛ تكنولوجيا (CDMA1900) الوصول المتعدد بتقسيم GSM1900 الشيفرة؛ نظام إدارة الهواتف DECT المحمولة؛ نظام الاتصال الرقمي بين LTE الأجهزة؛ النطاق UMTS 1,3,4,25؛ نظام الاتصال العالمي (للأجهزة المحمولة)
	1845		
	1970		
	2450	2400- 2570	بلوتوث، معيار الشبكة b/g/n المحلية 802.11 تقنية التعرف بترددات RFID 2450، الراديو معيار الاتصالات طويلة LTE Band 7 المدى
	5240	5100- 5800	WLAN معيار 802.11 a
	5500		
	5785		

الجدول 3

الإرشادات وإعلان الشركة المصنعة - المناعة الكهرومغناطيسية			
التعديل	التعديل	المسافة (م)	مستوى اختبار المناعة (فولت/م)
تعديل النبض بتردد 18 هرتز	1.8	0.3	27
تعديل التردد ± 5 كيلوهرتز انحراف 1 كيلوهرتز (جبيي)	2	0.3	28
تعديل النبض بتردد 217 هرتز	0.2	0.3	9
تعديل النبض بتردد 18 هرتز	2	0.3	28
تعديل النبض بتردد 217 هرتز	2	0.3	28
تعديل النبض بتردد 217 هرتز	2	0.3	28
تعديل النبض بتردد 217 هرتز	0.2	0.3	9

الجدول 4

الإرشادات وإعلان الشركة المصنعة - المناعة الكهرومغناطيسية			
الترددات اللاسلكية المشعة IEC61000-4-39 (مواصفات اختبار مناعة منفذ العلبة للمجالات المغناطيسية القريبة)	تردد الاختبار (ميغا هرتز)	التعديل	IEC 60601-1-2 مستوى الاختبار
30 كيلوهرتز	CW	8	8
134.2 كيلوهرتز	تعديل النبض 2.1 كيلوهرتز	65	65
13.56 ميغا هرتز	تعديل النبض 50 كيلوهرتز	7,5	7,5

14. الضمان/الخدمة

وفقاً لسياساتنا المتعلقة بتحسين المستمر للمنتج، فإننا نحفظ بالحق في إجراء تغييرات تقنية وبصرية دون إشعار.

شروط الضمان والإصلاح

الضمان: 24 شهرًا.

يرجى الاتصال بالوكيل أو مركز الخدمة في حالة تقديم طلب بموجب الضمان. إذا تعين عليك إعادة الوحدة، يرجى إرفاق نسخة من إيصال الشراء وتوضيح العيب الموجود.

تتطبق شروط الضمان التالية:

1. تبلغ فترة ضمان منتجات Spengler 24 شهرًا من تاريخ الشراء. في حالة تقديم طلب الضمان، يجب إثبات تاريخ الشراء باستخدام إيصال البيع أو الفاتورة.
2. سيتم إصلاح العيوب في المواد أو عيوب التصنيع مجانًا خلال فترة الضمان.
3. الإصلاحات التي تتم بموجب الضمان لا تمدد فترة الضمان سواء للوحدة أو للأجزاء البديلة.
4. يستثنى ما يلي من الضمان:
 - أ. جميع الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام، مثل عدم الالتزام بتعليمات الاستخدام.
 - ب. جميع الأضرار الناتجة عن الإصلاحات أو التلاعب من قبل العميل أو أطراف ثالثة غير معتمدة.
 - ت. الأضرار التي حدث أثناء النقل من المصنّع إلى المستهلك أو أثناء النقل إلى مركز الخدمة.
 - ث. الملحقات التي تتعرض للتلف الناتج عن الاستخدام العادي.
5. لا تتحمل الشركة المصنعة المسؤولية عن الخسائر المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن استخدام الوحدة، حتى وإن تم قبول الضرر في الوحدة كطلب ضمن الضمان.

- تعلن شركة قوانغتشو بيركوم للأجهزة الطبية المحدودة صراحةً أنها تخلي مسؤوليتها عن جميع الضمانات المتعلقة بصلاحية البيع والملائمة لغرض معين.
- لا تتحمل شركة Spengler، تحت أي ظرف من الظروف، أي التزام أو مسؤولية عن أي خسارة في الأرباح أو أي أضرار تترتب على ذلك، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، أو عرضية، أو خاصة، أو عقابية، أو محتملة، تتعلق بأي مطالبات من قبل أي عميل أو مستهلك أو مستخدم آخر لمنتجات Spengler.
- إذا فرضت أي قوانين سارية ضمانات أو شروط أو التزامات لا يمكن استبعادها أو تعديلها، فإن هذه الفقرة تنطبق إلى أقصى حد تسمح به هذه القوانين.

15. التخلص من النفايات

يجب عدم التخلص من نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية كنفايات بلدية غير مصنفة، ويجب تجميع هذه النفايات بشكل منفصل.



وفقًا للتوجيه EU/2012/19 واللوائح الوطنية للتخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة، يرجى العلم أنه يجب التخلص من هذه العناصر بطريقة خاصة داخل أراضي الاتحاد الأوروبي (EU). وهذه اللوائح تتطلب إعادة تدوير/ التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة بطريقة صديقة للبيئة. لا يجوز التخلص من مثل تلك العناصر كنفايات منزلية. وقد أشير إلى ذلك باستخدام أيقونة "سلة النفايات المشطوبة".



يحتوي مقياس الحرارة الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء غير التلامسي (الموديل: JXB-182) على بطاريات ونفايات إلكترونية قابلة لإعادة التدوير. لحماية البيئة، لا تتخلص من تلك العناصر مع النفايات المنزلية كنفايات بلدية غير مصنفة، بل قم بجمعها بشكل منفصل ونقلها إلى مركز تجميع محلي مناسب.

يحتوي مقياس الحرارة الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء غير التلامسي (الموديل: JXB-182) على أنه من المعدات الصغيرة (الفئة الخامسة) وفقًا للملحق الرابع من التوجيه EU/2012/19.


قبل التخلص من مقياس الحرارة الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء غير التلامسي (الموديل: JXB-182)، يرجى إزالة البطاريات من مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء غير التلامسي (الموديل: JXB-182) وتخلص من بطاريات مقياس الحرارة الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء غير التلامسي (الموديل: JXB-182) بشكل منفصل.

يمكنك إزالة البطاريات بالشكل التالي:

← مخطط إزالة البطارية

① افتح الغطاء الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز

② أزل البطاريات.

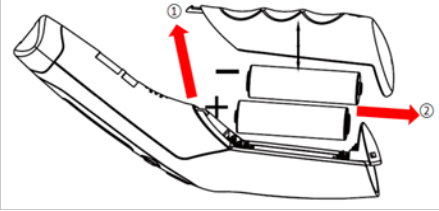

تمثل البطاريات خطرًا على الصحة والبيئة. لا تفتح البطاريات أو تتلفها أو تبتلعها أبدًا أو تتركها تلوث البيئة. لأنها قد تحتوي على معادن ثقيلة سامة وخطرة على البيئة. يجب التخلص من البطاريات التي تمت إزالتها في نقطة البيع أو في الحاويات المناسبة التي توفرها سلطات النفايات العامة المحلية في نقاط التجميع ومعالجتها وفقًا لـ EC/2006/66.

يجب التخلص من البطاريات والمخلفات الإلكترونية القابلة لإعادة التدوير في حاويات نفايات منفصلة.

يجب التخلص من مواد التغليف وفقًا للوائح المحلية. توجه إلى نقاط التجميع المعتمدة للحصول على مزيد من المعلومات.

في ألمانيا

للتخلص من النفايات الإلكترونية القابلة لإعادة التدوير، يمكنك البحث عن نقاط التجميع المعتمدة على الموقع التالي:

<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>

للتخلص من البطاريات، يمكنك البحث عن نقاط التجميع المعتمدة على الموقع التالي:

<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/battghersteller#no-back>

طريقة البحث: استخدم الرمز البريدي الخاص بك أو اسم المدينة والولاية التي تعيش فيها للعثور على نقاط التجميع بالقرب منك.

بلدان أخرى

للحصول على معلومات خاصة بالتخلص من النفايات في بلد معينة، اتصل بالموزعين أو المستوردين المحليين لديك.



SPENGLER MEDICAL

Osoite: 30 rue Jean de Guiramand,
13290 Aix-en-Provence, Ranska



Guangzhou Berrcom Medical Device Co., Ltd

Address: No.38 Huanzhen Xi Road, Dagang
Town, Nansha, 511470 Guangzhou, Guangdong,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86(20)34938449
Email: service@berrcom.com



**Shanghai International Holding Corp. GmbH
(Eurooppa)**

Osoite: Eiffestrasse 80, 20537 Hampuri, Saksa

CE 0123

HUOMAUTUS

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja noudata kaikkia ohjeita.

Säilytä käyttöopas myöhempää tarvetta varten. Tarkista laitteen toiminnot tämän käyttöoppaan mukaisesti aina ennen käyttöä ja käytä laitetta ainoastaan, jos se on moitteettomassa käyttökunnossa.

SISÄLTÖ

I. KÄYTTÖTARKOITUS	82
II. VAROITUKSET JA VAROTOIMENPITEET	82
III. KOSKETUKSETTOMAN INFRAPUNAKUUMEMITTARIN TOIMINTAPERIAATE.....	84
IV. TUOTEKUVAUS.....	84
V. KOSKETUKSETTOMAN INFRAPUNAKUUMEMITTARIN KÄYTTÄMINEN	84
VI. KUUMEMITTARIN KÄYNNISTYS JA ASETUS	85
VII. TEKNISET TIEDOT	87
VIII. PARISTOT.....	88
IX. TOIMITUSSISÄLTÖ.....	88
X. PUHDISTUS JA DESINFIOINTI.....	89
XI. VIANMÄÄRITYS.....	90
XII. MERKIT JA SYMBOLIT.....	92
XIII. SÄHKÖMAGNEETTISTA YHTEENSOPIVUUTTA KOSKEVAT TIEDOT	93
XIV. TAKUU/HUOLTO	96
XV. HÄVITTÄMINEN.....	97



• VERSION FRANÇAISE	P. 2
• ENGLISH VERSION	P. 22
• VERSIÓN ESPAÑOLA	P. 42
ص.62	• النسخة العربية
• SUOMENKIELINEN VERSIO	S.80

I. KÄYTTÖTARKOITUS

Laite on infrapunakuumemittari, joka on tarkoitettu mittaamaan otsalämpö lapsilla ja aikuisilla kehoa koskettamatta. Sitä voivat käyttää käyttäjät kotiympäristössä ja lääkärit sairaaloissa.



II. VAROITUKSET JA

VAROITIMENPITEET

- Käytä tätä kuumemittaria ainoastaan luettuasi käyttöoppaan ja varmistettuasi, että olet ymmärtänyt sen koko sisällön.
- Käytä tätä kuumemittaria ainoastaan käyttöoppaassa määritettyyn käyttötarkoitukseen. Väärinkäyttö johtaa takuun raukeamiseen.
- Tätä kuumemittaria voidaan käyttää ammattikäytössä tai henkilökohtaisessa kotikäytössä.
- Tämän kuumemittarin käyttäminen ei korvaa lääkärin konsultaatiota. Älä tee itsediagnoosia äläkä ota lääkkeitä mittausten perusteella konsultoimatta lääkäriäsi. Älä erityisesti aloita uuden lääkkeen ottamista tai muuta sinulle määrätyn lääkkeen tyyppiä ja/tai annostusta ilman lääkärin suostumusta.
- Älä erityisesti ota uutta lääkettä tai muuta sinulle määrätyn lääkkeen tyyppiä ja/tai annosta ilman lääkärin konsultointia ja lupaa.
- Tätä kuumemittaria saavat käyttää ainoastaan aikuiset, ja se on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että lapset eivät käytä tätä laitetta ilman valvontaa; laite sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai voidaan niellä.
- Jos tätä kuumemittaria varastoidaan käyttöpaikkaa viileämmässä tai lämpimämmässä paikassa, aseta kuumemittari käyttöpaikkaan vähintään 30 minuuttia ennen mittaamista.
- Odota noin 30 minuuttia fyysisen aktiviteetin tai kylvyn jälkeen tai vietettyäsi aikaa ulkona, ennen kuin mittaat lämpötilan otsastasi.
- Varmista tarkka mittaus käyttämällä tätä kuumemittaria ainoastaan sisätiloissa 10–40 °C:n lämpötilassa.
- Kuumemittarit on puhdistettava tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti ennen käyttöä ja aina käytön jälkeen mahdollisten bakteeritartuntojen välttämiseksi.
- Älä altista tätä kuumemittaria sähköiskuille.
- Älä altista tätä kuumemittaria ääriämpötiloille.

(yli 55 °C tai alle -20 °C).


- Älä käytä tätä kuumemittaria yli 85 %:n suhteellisessa kosteudessa.
- Älä laita tätä laitetta paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle, korkealle lämpötilalle, korkealle kosteudelle tai runsaalle pölylle tai jossa se saattaa joutua kosketukseen syövyttävien kaasujen tai nesteiden kanssa. Älä käytä tätä laitetta edellä mainitussa ympäristössä.
- Älä pudota tätä kuumemittaria.
- Älä kosketa sormillasi infrapuna-anturin lasia, sillä se on erittäin helposti särkyvä ja voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- Älä käytä tätä kuumemittaria, jos se on vaurioitunut.
- Älä avaa tätä kuumemittaria. Se sisältää pieniä osia, joita lapset voivat niellä.
- Älä koskaan upota tätä laitetta veteen tai muihin puhdistusnesteisiin, ja varo, ettei tämän laitteen sisälle pääse nestettä.
- Poista paristot laitteesta, jos laite on pidemmän ajan käyttämättä; muutoin on olemassa paristojen vuotamisen riski.
- Pidä kuumemittari poissa sähkömagneettisista kentistä, joita esim. mikroaaltouunit, kaarihitsauslaitteet ja induktiokuumentimet muodostavat.
- Laitetta ei saa enää käyttää sen odotettavissa olevan käyttöiän (5 vuotta laitteen valmistuspäivästä alkaen) saavuttamisen jälkeen. Katso luvusta XV laitteen hävittämistä koskevat ohjeet.
- Sähkölaitteet ja paristot sisältävät raskasmetalleja ja kemikaaleja, jotka saattavat vahingoittaa ympäristöä; noudata niiden hävittämisessä paikallisia lakeja ja asetuksia.
- Ota seuraavissa asioissa yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään:
 - Jos kuumemittarissa ilmenee häiriö tai se vaurioituu: **ÄLÄ** yritä korjata kuumemittaria itse, sillä se johtaa takuun raukeamiseen. Vain valtuutetut huoltokumppanit saavat korjata laitteen. **VALMISTAJA** toimittaa pyynnöstä piirikaaviot, osaluettelot, kuvaukset, kalibrintiohjeet tai muut tiedot, jotka auttavat **HUOLTOHENKILÖSTÖÄ** korjaamaan sellaiset **LÄÄKINNÄLLISEN SÄHKÖLAITTEEN** osat, jotka **VALMISTAJA** on määrittänyt **HUOLTOHENKILÖSTÖN** korjattaviksi.
 - Jos tarvitset apua kuumemittarin asettamisessa, käytössä tai kunnossapidossa.
 - Jos haluat ilmoittaa laitteen käytön aikana ilmenneistä odottamattomista toiminnoista tai tapahtumista.

III. KOSKETUKSETTOMAN INFRA-PUNAKUUMEMITTARIN TOIMINTAPERIAATE

Kaikki esineet, kiinteät aineet, nesteet ja kaasut säteilevät energiaa. Tämän energian voimakkuus riippuu esineen lämpötilasta. Sen vuoksi infrapunakuumemittari pystyy mittaamaan henkilön lämpötilan hänen säteilemänsä energian perusteella. Tämä mittaus voidaan tehdä laitteessa olevan ulkoisen lämpötila-anturin avulla, joka jatkuvasti analysoi ja rekisteröi ympäristön lämpötilaa. Kun käyttäjä pitää kuumemittaria lähellä kehoa ja aktivoi säteilyanturin, lämpötila mitataan heti tunnistamalla valtimoverenkierron tuottama infrapunälämpö. Siten kehonlämpö voidaan mitata ilman ympäristön lämmön aiheuttamia häiriöitä.

Huomautus: Kosketuksettoman infrapunakuumemittarin viitekehonlämpötila on kainalolämpötila.

IV. TUOTEKUVAUS

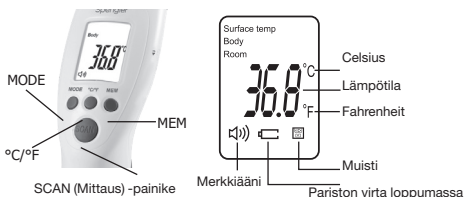

V. KOSKETUKSETTOMAN INFRA-PUNAKUUMEMITTARIN KÄYTÄMINEN

LÄMMÖN MITTAAMINEN

Kohdista kuumemittari OTSAAN oikeanpuoleisen ohimon yläpuolelle noin 3–5 cm:n etäisyydellä. Paina kuumemittarin mittauspainiketta. Lämpötila tulee heti näkyviin näyttöön.

Noudata seuraavia ohjeita ennen lämpötilan mittausta varmistaaksesi vakaat ja luotettavat tulokset:

- Poista otsalla olevat hiukset.
- Pyyhi otsalla mahdollisesti oleva hiki.
- Vältä mahdollisen ilmavirran vaikutus (esim. happiviikset tai ilmastointilaitte).
- Pidä minuutin tauko eri henkilöiden mittausten välillä.
- Jos ympäristön lämpötila muuttuu merkittävästi ympäristössä tapahtuneiden muutosten

vuoksi, anna TEMPO EASY kosketuksettoman infrapunakuumemittarin mukautua ympäristön lämpötilaan vähintään 30 minuuttia ennen käyttöä.



Luotettavien tulosten takaamiseksi:

- **ÄLÄ** yritä mitata kehonlämpöä kohdistamalla laitetta jotakin muuta kehonosaa kohti kuin otsaa (esim. käsivarret, jalat, vartalo).
- **ÄLÄ** liikuta kuumemittaria, ennen kuin lopullinen tulos näkyy näytössä.
- **ÄLÄ** mittaa lämpötilaa vetoisissa paikoissa (esim. tuuli, ilmastointilaitte, tuuletin).
- **ÄLÄ** mittaa lämpötilaa heti raskaan fyysisen aktiviteetin, kylpemisen, lääkkeen ottamisen, syömisen tai juomisen jälkeen tai sen jälkeen, kun otsalle on asetettu kylmä tai lämmin kompressi.
- **ÄLÄ** mittaa lämpötilaa, jos ympäristöolosuhteet ovat muuttuneet merkittävästi. Jos ympäristön lämpötila on muuttunut merkittävästi ympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi, anna laitteen mukautua ympäristön lämpötilaan vähintään 30 minuuttia ennen mittausta.
- **Odota** mittausten välillä vähintään 3–5 sekuntia.
- **Suosittelomme** mittaamaan otsalämmön kolme kertaa. Jos kolmen mittauksen välillä on eroavaisuuksia, käytä korkeinta tulosta.

VI. KUUMEMITTARIN KÄYNNISTYS JA ASETUS

1. Aseta paristo paikalleen.
2. Kun laitetta käytetään ensimmäistä kertaa tai kun siihen asetetaan uusi paristo, anna laitteen lämmetä 10-15 minuuttia.
3. Kohdista laite otsaan 3–5 cm:n etäisyydeltä ja paina mittauspainiketta. Lämpötila tulee näkyviin 1 sekunnin kuluttua.
4. Poista hiukset ja hiki otsalta ennen lämpötilan mittaamista.
5. Käynnistä laite.
Kun laite on käynnistetty, paina "SCAN" (Mittaus) -painiketta. Yhden sekunnin kuluttua siitä, kun näyttö on kokonaan näkyvissä, se kytkeytyy valmiustilaan ja näytössä näkyy "---°C" tai "---°F".
Paina sitten "SCAN" (Mittaus) -painiketta uudelleen. Mittaustulos tulee näkyviin 1 sekunnin kuluttua. Jos laitetta ei enää käytetä, se sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.

E

6. Käynnistetyn laitteen käyttötilan asetus
 - a. Paina "MODE" (Tila) -painiketta. Näytössä näkyy: "Body...°C" (Keho ...°C).
 - b. Paina uudelleen "MODE" (Tila) -painiketta. Näytössä näkyy: "Surface Temp...°C" (Pintalämpötila ...°C).
 - c. Paina uudelleen "MODE" (Tila) -painiketta. Näytössä näkyy: "Room...°C" (Huone ...°C).
7. Muisti

Kun laite on päällä, paina "MEM"-painiketta, jolloin näyttöön tulee viimeisin lämpötila ja voit tarkastella 32 viimeisintä mittaustulosta.
8. Muistin tyhjentäminen

Kun laite on päällä, paina "MEM"-painiketta ja pidä sitä painettuna 5 sekuntia, jolloin kaikki tiedot muistista poistetaan. Paina sitten "MEM"-painiketta uudelleen, jolloin näytössä näkyy "CLr".
9. Korkean lämpötilan hälytystoiminto

Kehonlämpötilatilassa, jos mitattu kehonlämpötila on korkeampi tai vähintään 38 °C, laite antaa jatkuvaa äänimerkkiä.



HUOMAUTUS: PINTALÄMPÖTILAN JA HUONELÄMPÖTILAN MITTAUKSET EIVÄT OLE LÄÄKETIETEELLISIÄ KÄYTTÖTARKOITUKSIA.

Pintalämpötila poikkeaa kehonlämpötilasta. Kehonlämpötilan mittaamiseksi on käytettävä kehonlämpötilan mittaustilaa. Käytä pintalämpötilan mittaustilaa esim. tuttipullon tai kylpyveden lämpötilan mittaukseen ja huonelämpötilan mittaustilaa huonelämpötilan mittaukseen.

10. Käynnistetyn laitteen merkkiäänen voi ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä painamalla "🔊)". Merkkiääni on käytössä, kun näytössä näkyy "ON". Merkkiääni on pois käytöstä, kun näytössä näkyy "OFF".

11. PARISTOJEN VAIHTAMINEN

Näyttö: Kun LCD-näytössä näkyy "Battery" (Paristo), pariston virta on loppunut.


VII. TEKNISET TIEDOT

Ominaisuus	Arvo
Paristo	DC 3V (2 kpl AA-paristoja)
Lämpötila-anturi	Infrapuna-anturi
Mittausetäisyys	3–5 cm
Mittausalue	Kehonlämpötilan mittaustila: 32,0–43,0 °C Pintalämpötilan mittaustila: 0–60 °C Huonolämpötilan mittaustila: 0–40 °C
Mittaustarkkuus	Kehonlämpötilan mittaustila: 32,0–34,9 °C: ±0,3 °C 35,0–42,0 °C: ±0,2 °C 42,1–43,0 °C: ±0,3 °C
Kliininen toistettavuus	≤0,2 °C
Näyttötarkkuus	0,1 °C
Mittausaika	1 sekunti
Muisti	32 mittausta
Käyttöympäristö	Ympäristön lämpötila: 10–40 °C Suhteellinen ilmankosteus: ≤85 % RH Ilmanpaine: 700–1060 hPa
Varastointi- ja kuljetusolosuhteet	Ympäristön lämpötila: -20–55°C° Suhteellinen ilmankosteus: ≤95 % RH Ilmanpaine: 700–1060 hPa
Paino	Noin 80 g (ilman paristoa)
Laitteen koko	Noin 175 x 50 x 52 mm (P x L x K)
Odotettavissa oleva käyttöikä	5 vuotta
Automaattinen sammutus	≤ 30 s
Mittauspaikka	Otsa
Viitekehonalue	Kainalo
Käyttötila	Säädetty tila

VIII. PARISTOT

1. PARISTOJEN VAIHTAMINEN

Toimenpide: Avaa kansi ja vaihda paristot. Varmista huolellisesti, että paristot asetetaan oikeaan asentoon. Jos paristot asetetaan väärin, seurauksena voi olla TEMPO EASY kosketuksettoman infrapunakuumemittarin vaurioituminen ja takuun raukeaminen. Älä koskaan käytä ladattavia paristoja. Käytä ainoastaan kertakäyttöisiä paristoja.

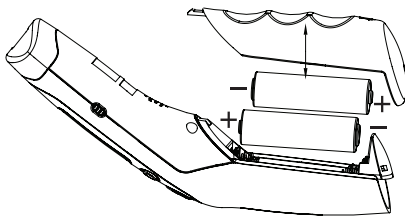

2. PARISTOJEN HÄVITTÄMINEN

Ympäristön suojelemiseksi toimita tyhjät paristot asianmukaisiin keräyspisteisiin kansallisten tai paikallisten määräysten mukaisesti.

Hävitysmenetelmä kuvataan luvussa XV.



Paristojen käsittelyä koskevia ohjeita

- Jos paristojen sisältämää nestettä joutuu iholle tai silmiin, huuhtelee kyseinen alue vedellä ja hakeudu lääkäriin.



Tukehtumisvaara! Pienet lapset saattavat niellä paristoja ja tukehtua. Säilytä paristoja poissa pienten lasten ulottuvilta.

- Jos paristo on vuotanut, pue suojakäsineet ja puhdista paristolokero kuivalla liinalla.
- Suojaa paristoja liialliselta kuumuudelta.



Räjähdysvaara! Älä heitä paristoja tuleen.

- Käytä ainoastaan samanlaisia tai vastaavan tyyppisiä paristoja.
- Vaihda aina kaikki paristot kerralla.
- Älä käytä ladattavia paristoja.
- Älä pura, halkaise tai murskaa paristoja.

IX. TOIMITUSSISÄLTÖ

- 1 kuumemittari
- 1 käyttöopas
- 2 AA-paristoa

X. PUHDISTUS JA DESINFIOINTI



Kuumemittari on usean potilaan käyttöön tarkoitettu uudelleenkäytettävä laite, ja puhdistus- ja desinfiointiohjeet on validoitu. Noudata kuumemittarin puhdistus- ja desinfiointiohjeita ennen käyttöä.

Puhdistus:

- 1) Poista tahrat ja rasva kuumemittarin kotelosta ja mittausanturista puhdistamalla ne perusteellisesti kuumalla vedellä tai neutraalilla puhdistusaineella kostutetulla vanupuikolla.
- 2) Tarkista kuumemittari silmämääräisesti puhdistuksen jälkeen ja varmista, ettei siihen ole jäänyt epäpuhtauksia tai tahroja. Jos laite ei ole puhdistuksen lopussa silmämääräisesti puhdas, on joko toistettava edelliset puhdistusvaiheet tai hävitettävä laite turvallisesti, jotta silmämääräisesti epäpuhdasta laitetta ei käytetä uudelleen.

Desinfiointi:

- 1) Desinfioi kuumemittarin kotelo ja anturi 30 sekunnin ajan vanupuikolla tai nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu 75 %:lla etanolilla.
- 2) Toista edellä kuvatut toimenpiteet vähintään 3 kertaa. Pyyhi sitten kuumemittarin pinnat ja anturi kuiviksi puhtaalla liinalla ja anna laitteen kuivua noin 1 minuuttia desinfioinnin jälkeen.

Huomautus:

- Varmista, ettei kuumemittarin sisälle pääse nesteitä.
- Älä koskaan käytä puhdistukseen hankaavia puhdistusaineita, ohenteita tai bentseeniä, äläkä koskaan upota kuumemittaria veteen tai muihin puhdistusnesteisiin.
- Varo naarmuttamasta anturin linssin ja näytön pintaa.
- Jos silmämääräisessä tarkastuksessa havaitaan ei-hyväksyttäviä vaurioita, kuten syöpymiä, värjäytymiä, reikiä tai halkeamia, laitetta ei saa enää käyttää ja se on hävitettävä.
- Jos kuumemittaria on käytetty potilailla, tarkista aina käytön jälkeen, onko kotelossa tai anturissa tahroja tai rasvaa, ja puhdista kuumemittari asianmukaisten puhdistus- ja desinfiointiohjeiden mukaisesti.

HOITO JA HUOLTO

- Puhdista kuumemittari säännöllisesti, yleensä kerran kuukaudessa.
- Jos anturin kärki on vaurioitunut, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
- Jos laitteessa on epäpuhtauksia, puhdista se tarvittaessa; jos laite on pidempään käyttämättä (yli 2 kuukautta), poista siitä kaikki paristot.
- Varastoi kuumemittaria kuivassa, pölyttömässä ja puhtaassa paikassa suoralta auringonvalolta suojattuna.
- Älä käytä muita kuin määritettyjä paristoja. Älä käytä ladattavia paristoja äläkä heitä paristoja tuleen.
- Älä altista kuumemittaria auringonvalolle tai vedelle.
- Älä käsittele kuumemittaria kovakouraisesti. Laitteen putoaminen tai siihen kohdistuvat iskut johtavat laitteen vaurioitumiseen.

Kalibrointi:

Tämä lämpömittari on kalibroitu valmistushetkellä, ja lääketieteellinen infrapunalämpömittari vaatii vuosittaisen turvallisuustarkastuksen. Jos epäilet milloin tahansa mittaustuloksen tarkkuutta, ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään.

Tämän tuotteen kalibrointiin tarvitaan sopiva kalibrointilaitteisto, muuten sitä ei voi kalibroida itsenäisesti.

XI. VIANMÄÄRITYS


Jos kuumemittarin käytössä ilmenee ongelmia, katso tässä käyttöoppaassa olevat ongelman poistoon tarkoitetut ohjeet. Jos ongelmaa ei voida poistaa, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

NÄYTÖSSÄ NÄKYVÄ ILMOITUS "HI"

Kehonlämpötilan mittaustilassa kuumemittarin näytössä näkyy "HI", jos mitattu lämpötila on yli 43 °C.

Pintalämpötilan mittaustilassa kuumemittarin näytössä näkyy "HI", jos mitattu lämpötila on yli 60 °C.

Huonelämpötilan mittaustilassa kuumemittarin näytössä näkyy "HI", jos mitattu ympäristön lämpötila on yli 40 °C.

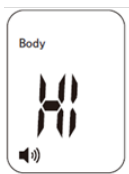

NÄYTÖSSÄ NÄKYVÄ ILMOITUS "LO"

Kehonlämpötilan mittaustilassa kuumemittarin näytössä näkyy "LO", jos mitattu lämpötila on alle 32 °C.

Pintalämpötilan mittaustilassa kuumemittarin näytössä näkyy "LO", jos mitattu lämpötila on alle 0 °C.

Huonelämpötilan mittaustilassa kuumemittarin näytössä näkyy "LO", jos mitattu ympäristön lämpötila on alle 0 °C.



Tämä ilmoitus johtuu useista eri syistä. Katso alla oleva luettelo yleisimmistä ongelmista:

"LO"-ilmoitukseen johtavat syyt	Toimintaohje
Hiuukset tai hiki haittaavat lämpötilan mittaamista.	Varmista ennen lämpötilan mittaamista, ettei otsalla ole mitään mittaamista häiritsevää eikä kosteutta.
Ilmavirta tai ympäristön lämpötilan voimakas muutos alentaa lämpötilaa.	Varmista, ettei käyttöpaikassa ole ilmavirtaa, joka voisi vaikuttaa infrapunamittaukseen.
Lämpötilamittaukset tehtiin liian tiheään ja kuumemittari ei ehtinyt käynnistyä uudelleen.	Pidä mittausten välillä vähintään 3–5 sekunnin tauko – suosituksena on 15 sekunnin tauko.
Mittausetäisyys on liian suuri.	Noudata mittauksessa suositeltua etäisyyttä (noin 3–5 cm).

XII. MERKIT JA SYMBOLIT

Symboli	Symbolin kuvaus
 Spengler TEMPO EASY	Tuotemerkki
	Ilmaisee, että käyttäjän on tutustuttava käyttöoppaan tärkeisiin varoitaviin tietoihin, kuten varoituksiin ja varotoimenpiteisiin, joita eri syistä johtuen ei voida esittää itse lääkinnällisessä laitteessa.
	Käyttöosa, BF-tyyppi
	Tasavirta
IP22	Suojausaste veden ja hiukkasten haitalliselta tunkeutumiselta. 2 Suojattu sellaisia kiinteitä vieraita esineitä vastaan, joiden Ø on 12,5 mm tai suurempi. 2 Suojaus pystysuoraan putoavia vesipisaroita vastaan, kun KOTELOA on kallistettu enintään 15°.

Symboli	Symbolin kuvaus
	HÄVITTÄMINEN: Älä hävitä tätä laitetta lajittelemattoman yhdyskuntajätteen seassa. Tällainen jäte on kerättävä erikseen erikoiskäsittelyä varten.
	Lue käyttöopas huolellisesti.
	Eränumero
	Valmistaja
	Lääkinnällinen laite
	Eurooppalaisen valtuutetun edustajan symboli, ilmaisee nimenomaisesti eurooppalaisen valtuutetun edustajan nimen ja osoitteen symbolin jälkeen.
	CE-merkintä ilmaisee, että laite on yhdenmukainen lääkitämisaläkkeitä koskevien EU-asetusten olennaisten vaatimusten kanssa.
	Mallinumero
	Valmistuspäivä ja -maa
	Maahantuoja
	Jälleenmyyjä
	Särkyvä, käsittele varoen
	Säilytä kuivassa
	Lämpötilan raja-arvot
	Kosteuden raja-arvot
	Pakkauksen suunta
	Älä pinoa yli 6 laatikkoa
	Luettelonumero
	Sarjanumero
	Yksilöllinen laitetunniste
	Valmistuspäivä
	Hävitä pakkaus ympäristöä kunnioittaen.

XIII. SÄHKÖMAGNEETTISTA YHTEENSOPIVUUTTA KOSKEVAT TIEDOT

Lääkinnällinen sähkölaite tai lääkitieteellinen sähköjärjestelmä sopii käyttöön kotihoidossa ja sairaalaympäristössä.

Selvitys: Kosketukseton infrapunalämpömittari, malli JXB-182, on testattu teknisen raportin IEC TS 60601-4-2: Lääketieteelliset sähkölaitteet – Osa 4-2: Ohjeet ja tulkinnot – Sähkömagneettinen häiriönsietokyky; lääketieteellisten sähkölaitteiden ja lääketieteellisten sähköjärjestelmien suorituskyky, suositusten mukaisesti.

Varoitus: Älä käytä laitetta lähellä aktiivisia suurtaajuuskirurgisia laitteita tai magneettikuvaukseen tarkoitetun lääkitieteellisen sähköjärjestelmän RF-suojattua tilaa, jossa sähkömagneettisten häiriöiden voimakkuus on suuri.

Varoitus: Tämän laitteen käyttöä muiden laitteiden vieressä tai päällekkäin niiden kanssa on vältettävä, sillä se voi johtaa toimintahäiriöihin. Mikäli tällainen käyttö on välttämätöntä, tätä laitetta ja muita laitteita on tarkkailtava sen varmistamiseksi, että ne toimivat asianmukaisesti.

Varoitus: Muiden kuin tämän laitteen valmistajan määrittelemien tai toimittamien lisävarusteiden, antureiden ja kaapeleiden käyttö voi lisätä sähkömagneettisia päästöjä tai heikentää laitteen sähkömagneettisten häiriöiden sietokykyä sekä johtaa toimintahäiriöihin.

Varoitus: Kannettavia RF-viestintälaitteita (mukaan lukien oheislaitteet, kuten antennikaapelit ja ulkoiset antennit) saa käyttää enintään 30 cm:n (12 tuuman) etäisyydellä JXB-182-laitteen osista, mukaan lukien valmistajan määrittelemät kaapelit. Muutoin seurauksena voi olla tämän laitteen suorituskyvyn heikkeneminen.

1. Kaikki tarvittavat ohjeet PERUSTURVALLISUUDEN ja OLENNAISEN SUORITUSKYVYN ylläpitämiseksi sähkömagneettisten häiriöiden osalta hyväksytyn käyttöiän aikana. Kannettavat ja siirrettävät RF-viestintälaitteet saattavat vaikuttaa JXB-182:n suorituskykyyn, joten vältä käytön aikana sellaisia voimakkaita sähkömagneettisia häiriöitä, joita voi esiintyä esim. matkapuhelinten tai mikroaaltouunien lähellä.

2. Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettiset päästöt ja häiriönsieto.

E Taulukko 1

Direktiivit ja valmistajan ilmoitus - sähkömagneettiset päästöt	
Päästöttestaus	Säännösten noudattaminen
RF-päästöt CISPR 11	Ryhmä 1
RF-päästöt CISPR 11	Luokka B
Harmoniset päästöt CEI 61000-3-2	Ei sovelleta
Jännitteen vaihtelusta/välkyn- nästä aiheutuvat päästöt CEI 61000-3-3	Ei sovelleta

Taulukko 2

Direktiivit ja valmistajan ilmoitus - sähkömagneettinen häiriönsieto		
Häiriönsietotesti	CEI 60601-1-2 Testitaso	Vaatimusten- mukaisuuden taso
Sähköstaattinen purkaus (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV koske- tuksessa ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ilmassa	±8 kV koske- tuksessa ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ilmassa
Transienttipurske IEC 61000-4-4	Ei sovelleta	Ei sovelleta
Ylijännite IEC 61000-4-5	Ei sovelleta	Ei sovelleta
Jännitehäviöt, lyhyet keskeytykset ja jännitteen vaihtelut virtalähteen syöttöjohdoissa IEC 61000-4-11	Ei sovelleta	Ei sovelleta
Magneettikentät verkkotaajuudella IEC 61000-4-8	30A/m 50Hz/60Hz	30A/m 50Hz/60Hz
Johdettu RF IEC 61000-4-6	Ei sovelleta	Ei sovelleta
Säteilty RF IEC 61000-4-3	10V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80 % AM 2 kHz:n taajuus- della	10V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80 % AM 2 kHz:n taajuus- della
HUOMAUTUS UT on verkkovirtajännite ennen testitasoa.		

Taulukko 3

Direktiivit ja valmistajan ilmoitus - sähkömagneettinen häiriönsieto			
Modulaatio	Mo- dulaa- tio	Etäi- syys (m)	HÄIRIÖN- SIEDON TESTITA- SO (V/m)
18 Hz:n pulssimodulaatio	1.8	0.3	27
FM±5 kHz:n poikkeama 1 kHz:n sinimuotoinen taajuusalue	2	0.3	28
217 Hz:n pulssimodulaatio	0.2	0.3	9
18 Hz:n pulssimodulaatio	2	0.3	28
217 Hz:n pulssimodulaatio	2	0.3	28
217 Hz:n pulssimodulaatio	2	0.3	28
217 Hz:n pulssimodulaatio	0.2	0.3	9

Taulukko 3

Direktiivit ja valmistajan ilmoitus - sähkömagneettinen häiriönsieto			
Säteily RF IEC 61000-4-3 (Lan- gattomien RF-viestin- tälaitteiden KOTELOON PÄÄSYN HÄIRIÖN- SIEDON testausvaa- timukset)	Testi- taajuus (MHz)	Kaista (MHz)	Palvelu
	385	380-390	TETRA 400
	450	430-470	GMRS 460 FRS 460
	710	704-787	Kaista LTE 13,17
	745		
	780		
	810	800-960	GSM800/900, TET- RA800, CDMA850, ITE5-kaista
	870		
	930		
	1720	1700- 1990	GSM 1800; GSM 1900; GSM 1900; DECT; LTE-kaistat 1,3,4,25; UMTS
	1845		
	1970		
	2450	2400- 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE-kaista 7
	5240	5100- 5800	WLAN 802.11 a/n
	5500		
	5785		

Taulukko 4

Direktiivit ja valmistajan ilmoitus - sähkömagneettinen häiriönsieto				
Säteilevä radiotaajuus (RF) IEC 61000-4-39 (Tes- tausmääräyk- set kotelon liitännöiden häiriönsieto- kyvylle lähei- syysmag- neettikenttien suhteen)	Testien toistu- vuus	Modu- laatio	IEC 60601- 1-2 Testi- taso (A/m)	Vaati- musten- mukai- suustaso (A/m)
	30 kHz	CW	8	8
	134,2 kHz	Pulssi- modu- laatio 2.1 kHz	65	65
	13,56 MHz	Pulssi- modu- laatio 50 kHz	7,5	7,5

XIV. TAKUU/HUOLTO

Jatkuvaan tuotekehitykseen tähtäävän toimintamme mukaisesti pidätämme oikeuden tehdä teknisiä ja optisia muutoksia ilman ennakoilmoitusta.

Takuu- ja korjausehdot

Takuu: 24 kuukautta.

Ota takuun piiriin kuuluvien valitusten osalta yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen. Jos laite on palautettava valmistajalle, toimita sen mukana kopio kuitista sekä kuvaus laitteessa olevasta viasta.

Seuraavia takuehtoja sovelletaan:

1. Spengler-laitteiden takuu on voimassa 24 kuukautta ostopäivämäärästä alkaen. Takuuvaatimustapauksessa ostopäivä on todistettava myyntikuitin tai laskun avulla.
2. Materiaali- ja valmistusvirheet korjataan maksutta takuuajana.
3. Takuun piiriin kuuluvat korjaukset eivät pidennä laitteen tai varaosien takuuajaa.
4. Takuu ei koske seuraavia tapauksia:
 - a. Kaikki vauriot, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käsittelystä, esim. käyttöoppaan laiminlyömisestä.
 - b. Kaikki vauriot, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan tai valtuuttamattoman kolmannen osapuolen tekemistä korjauksista tai muutoksista.
 - c. Vauriot, jotka ovat aiheutuneet kuljetuksessa valmistajalta asiakkaalle tai kuljetuksessa huoltoliikkeeseen.
 - d. Normaalisti kuluvat lisävarusteet.
5. Vastuu laitteesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista on suljettu pois, vaikka laitteen vaurio hyväksyttäisiin takuuvaatimuksena.

- **GUANGZHOU BERRCOM MEDICAL DEVICE CO., Ltd** kiistää nimenomaisesti kaikki myyntikelpoisuutta ja tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuutta koskevat takuut.

- Spengler ei missään tapauksessa vastaa voiton menetyksestä tai mistään välillisistä, satunnaisista, epäsuorista, erityisistä, rangaistuksiin liittyvistä tai ehdollisista vahingoista, jotka liittyvät asiakkaan, kuluttajan tai muun Spengler-laitteiden käyttäjän esittämiin vaatimuksiin.
- Jos sovellettavissa laeissa asetetaan takuita, ehtoja tai velvoitteita, joita ei voida sulkea pois tai muuttaa, tätä kohtaa sovelletaan siinä laajuudessa kuin tällaiset lait sallivat.

XV. HÄVITTÄMINEN



Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa hävittää lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä, vaan se on kerättävä erikseen.

Direktiivin 2012/19/EU sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevien kansallisten hävittämissäännösten mukaisesti on huomioitava, että tällaiset laitteet on hävitettävä erityisellä tavalla Euroopan unionissa (EU). Näissä asetuksissa vaaditaan, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on hävitettävä ympäristöystävällisesti. Tällaisia laitteita ei saa hävittää talousjätteen seassa. Tämä on ilmoitettu yliväiväatun jäteastian symbolilla.



Kosketukseton infrapunakuumemittari (malli: JXB-182) sisältää paristoja ja kierrätettävää elektroniikkaromua. Ympäristön suojelemiseksi sitä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä, vaan se on kerättävä erikseen ja toimitettava asianmukaiseen paikalliseen keräyspisteeseen.

Kosketukseton infrapunakuumemittari (malli: JXB-182) on luokiteltu pienlaitteeksi (5. kategoria) direktiivin 2012/19/EU liitteen IV mukaisesti.


Ennen kosketuksettoman infrapunakuumemittarin (malli: JXB-182) hävittämistä poista paristot kosketuksettomasta infrapunakuumemittarista (malli: JXB-182) ja hävitä kosketuksettoman infrapunakuumemittarin (malli: JXB-182) paristot erikseen.

Paristot voidaan poistaa seuraavasti:

➔ Paristojen poiston kaavio

① Avaa laitteen takaosassa oleva kansi.

② Poista paristot.

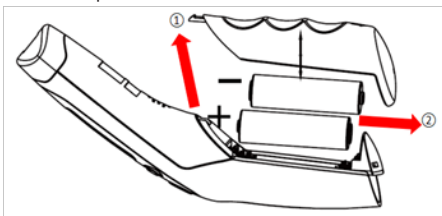

E

Paristot ovat terveydelle ja ympäristölle vaarallisia! Älä koskaan avaa, vaurioita tai niele paristoja äläkä anna niiden saastuttaa ympäristöä. Ne saattavat sisältää myrkyllisiä ja ympäristölle vaarallisia raskasmetalleja. Poistetut paristot on toimitettava hävitettäväksi myyntipisteeseen tai vastaaviin säiliöihin, joita paikalliset jäteviranomaiset tarjoavat keräyspisteissä, ja ne on käsiteltävä direktiivin 2006/66/EY mukaisesti.

Paristot ja kierrätettävä elektroniikkaromu on kerättävä erilliseen jätteastiaan hävittämistä varten.

Pakkausmateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti. Kysy lisätietoja valtuutetuista keräyspisteistä.

Saksassa

Kierrätettävän elektroniikkaromun hävittämistä varten voit etsiä valtuutettuja keräyspisteitä seuraavalta verkkosivustolta:

<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>

Paristojen hävittämistä varten voit etsiä valtuutettuja keräyspisteitä seuraavalta verkkosivustolta:

<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/battghersteller#no-back>

Hakumenetelmä: syötä postinumerosi tai kaupunkisi nimi ja vahvista, että haluat löytää asuinpaikkasi lähellä olevat keräyspisteet.

Muut maat

Kysy maakohtaisia hävittämistä koskevia ohjeita paikallisilta jälleenmyyjiltä tai maahantuojalta.



Spengler



0123



NU_TEMPOEASY_1VX_20261905



Guangzhou Berrcom Medical Device Co., Ltd

Address: No.38 Huanzhen Xi Road, Dagang
Town, Nansha, 511470 Guangzhou, Guangdong,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel: +86(20)34938449

Email: service@berrcom.com



Shanghai International Holding Corp. GmbH
(Europe)

Address: Eiffestrasse 80, 20537,
Hamburg, Germany



SPENGLER MEDICAL

30, rue Jean de Guirmand

13290 Aix-en-Provence – France