

Spengler Cardiologie vous présente *Cardiomate*, une nouvelle génération d'ECG :

Cardiomate EVI

LES TABLETTES ECG 100% AUTONOME !



3 À 5 ANS DE GARANTIE OFFERTE
ASSISTANCE OFFERTE





Avec son design soigné et sa taille compacte, EVI est l'ECG intuitif et ultra pratique.

Transportable dans tous les services et au chevet de chaque patient. Idéale en cabinet, en établissement, elle est aussi très adaptée au transport d'urgence conformément à la norme EN 1789.

Cardiomate EVI présente les mêmes performances que les autres ECG de la gamme *Cardiomate* avec une fréquence d'échantillonnage de 32000Hz qui lui confère un enregistrement détaillé de l'activité électrique du cœur.

2 tailles d'écran 7" et 10" accueillant en même temps le tracé sur 12 pistes ainsi que l'interprétation et ne nécessitant pas obligatoirement une impression, pour une démarche plus écoresponsable.

Cardiomate EVI 10" existe aussi en 18 dérivation plus utile dans les contextes d'urgence, en cas de douleurs thoraciques pour vérifier par exemple les atteintes cardiaques postérieures isolées, les atteintes cardiaque du ventricule droit ou autre. Le *Cardiomate EVI 10" 18 dérivation* propose 5 formats de tracés: 18 x1, 12x1 + 6x1, 6x3 +1R, 6x2 + 6x1 et 6x2 + 6x1 + 2R

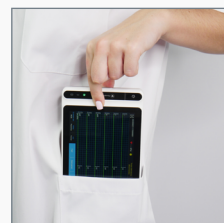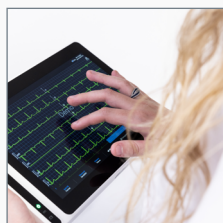

CE
0123
Classe IIa

TABLETTE ECG *Cardiomate* EVI



UNE TABLETTE 100% AUTONOME

- 2 tailles : 7" ou 10".
- Tablette 7" ECG 12 dérivations.
- Tablette 10" ECG 12 ou 18 dérivations
- + socle de recharge avec imprimante.



UNE PRÉCISION REDOUTABLE

- Une fréquence d'échantillonnage parmi les plus élevées du marché : 32000Hz.
- Détection et marquage automatique du stimulateur cardiaque.
- ECG 12 dérivations ou ECG 18 dérivations possible.



ASSISTANCE SPENGLER

- Pour tous les produits de la gamme EVI, vous bénéficiez d'une assistance gratuite à l'utilisation et au paramétrage de votre tablette ECG Cardiomate EVI. A distance, nos experts vous guident pas à pas.



INTUITIF ET EFFICACE

- Écran tactile 7" ou 10" haute résolution avec clavier azerty permettant d'éditer des commentaires sur l'électrocardiogramme.
- Visualisation en temps réel des 12 pistes de l'ECG sur la tablette en même temps que son interprétation automatique et les calculs d'intervalles.(sans recourir à un ordinateur ou à une imprimante), pour une démarche plus responsable.
- Signature numérique tactile.



DES DONNÉES ACCESSIBLES

- Mémoire interne de 10000 fichiers permettant de stocker, rappeler, éditer, imprimer les données des patients.
- Export de données via wifi ou port USB sous format pdf ou xml.
- Intégration aux systèmes de base de données cliniques et systèmes de gestion des centres hospitaliers.



VOTRE SAC DE BOISSY OFFERT !

- Transportez en toute aisance votre tablette EVI grâce à votre sac De Boissy, cette marque historique réinvente la traditionnelle mallette médecin avec style pour créer des sacs pratiques et confortables qui vous suivent partout.



GRANDE FACILITÉ D'IMPRESSION

- Impression des 12 pistes :
- très simplement sur votre imprimante réseau via wifi pour les 2 tablettes,
 - Sur l'imprimante thermique de la base pour la tablette 10".




NOMADE

- Un design ultra compact et une transportabilité affichée avec :
- coque de protection pour la 7',
 - support de bureau pour la 10"
 - Conforme à la norme EN 1789 pour une intégration adaptée aux véhicules de transport sanitaire.



UNE GRANDE AUTONOMIE

- Les 2 tablettes sont dotées d'une batterie de 5000 mAh pour une autonomie d'au moins 12h.

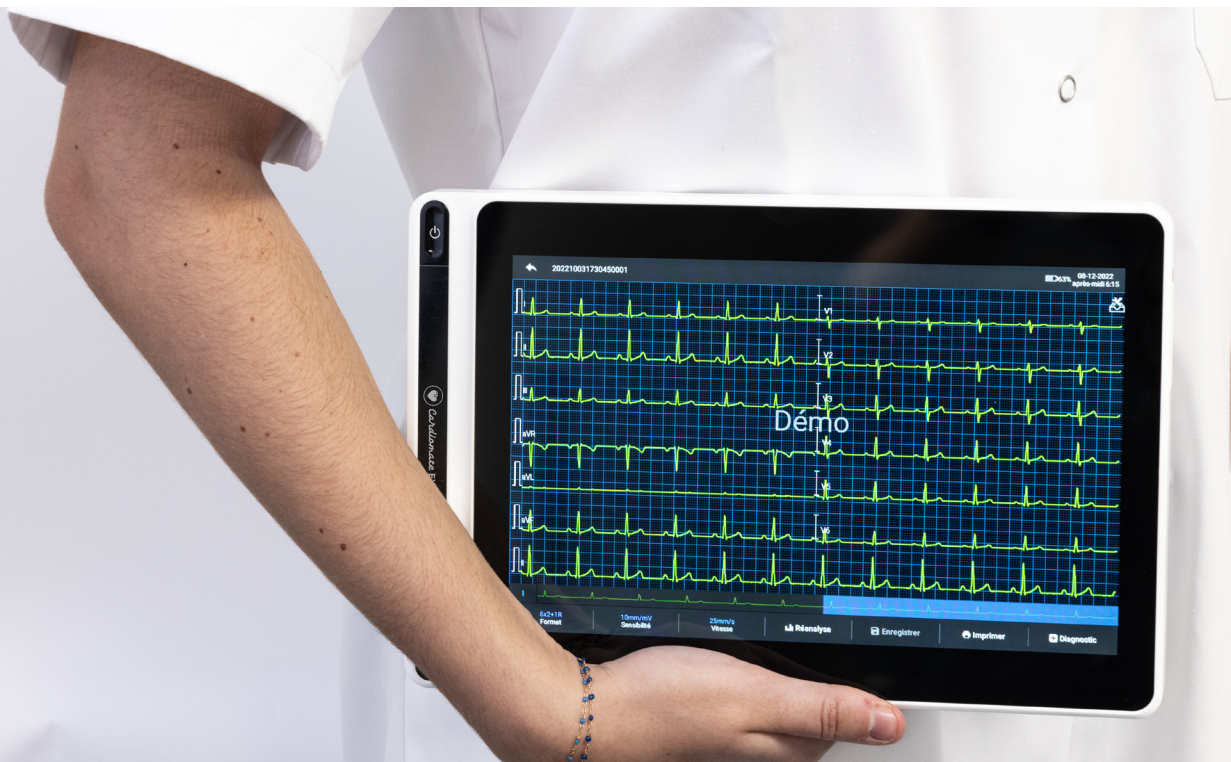

www.spengler.fr

Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

www.spengler.fr

TABLETTE ECG Cardiomate EVI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage du rythme cardiaque	30bpm~300bpm	Impédance d'entrée	≥100MΩ (10Hz)
Précision	±1	Courant d'entrée nominale	≤10nA
Dérivations	Acquisition de 12 dérivations Cardiomate EVI 7" et 10" (12 dérivations) Existe en acquisition de 18 dérivations Cardiomate EVI 10" (18 dérivations)	Tension d'étalonnage	1mV±2%
Convertisseur A/D	24 bits	Voltage de dépolarisation	±900mV, ±5%
Fréquence d'échantillonnage	32000 samples/Sec	Niveau de bruit	≤12.5μV
Taux de rejet du mode commun	≥140dB (AC filtre on) ≥120dB (AC filtre off)	Quantification de l'amplitude	0.95μV/LSB
Constante de temps	≥5s	Temps de récupération après une défibrillation	<10s
Fréquence de réponse	0.01HZ~350HZ (+0.4db-3.0db)	Détection du spike du stimulateur cardiaque	Battement du stimulateur avec amplitude de ±2mV~±700mV, durée de 0.1ms~2.0ms, A-5 temps de montée inférieur à 100μs, et fréquence de 100/min peut s'afficher sur l'enregistrement de l'ECG.
Sensibilité	Auto, 2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 40 mm/mV, moins de ±5% d'erreur	Signal détectable minimum	20μVp-p
Filtre	Filtre AC : 50Hz, 60Hz, Off Filtre EMG : 25Hz, 35Hz, 45Hz, Off Filtre ADS : 0.01Hz, 0.05Hz, 0.32Hz, 0.67Hz Filtre passe-bas : 75Hz, 100Hz, 150Hz, 300Hz, Off	Tablette 10.1"	Taille : 272.6mm(L) x 181.2mm(l) x 25.8mm(H) Poids net : 1.2kg
Vitesse d'impression	5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s et 50mm/s, moins de ±3% erreur	Base tablette 10.1"	Taille : 274mm(L) x 288mm(l) x 111.2mm(H) Poids net : 2.5kg
Interprétation automatique	Algorithme Glasgow	Tablette 7"	Taille : 197mm(L) x 112.4mm(l) x 26.1mm(H) Poids net : 0.8kg
Inclus	Tablette 7" : 1 tablette + coque + 1 mini sac médical Deboissy Ouessant, 1 câble patient, 4 pinces membres (électrodes d'extrémité), 6 poires précordiales (électrodes thoraciques), 1 câble d'alimentation, 1 clé USB (USB-C USB-A), 1 manuel d'utilisation. Tablette 10" : 1 tablette + son socle de recharge avec imprimante, 1 sac médical De Boissy Ouessant, 1 câble patient, 4 pinces membres (électrodes d'extrémité), 6 poires précordiales (électrodes thoraciques), 1 câble d'alimentation, 1 rouleau de papier, 1 manuel d'utilisation.		
GARANTIE SPENGLER	3 ans dont 2 ans offert pour la tablette 7" 5 ans dont 4 ans offert pour la tablette 10"		
CONFORMITÉ	Les tablettes EVI sont conformes aux exigences de la norme EN 1789 - Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. Ambulances routières.		

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Cardiomate EVI 7"	260 050
Cardiomate EVI 10" avec base imprimante	260 051
Cardiomate EVI 10" sans base imprimante	260 052
Cardiomate EVI 10" 18 leads (avec base imprimante)	260 054

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Sac médical Deboissy Ouessant	MDOUES01
Mini sac médical De Boissy Ouessant	MDOUES02

Accessoires

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Câble patient pour CARDIOMATE EVI 7 & 10"	260 060
Pinces membres pour électrodes ECG - set de 4	260 070
Pinces membres pédiatriques pour électrodes ECG - set de 4	260 071
Poires précordiales pour électrodes ECG - set de 6	260 072
Poires précordiales pédiatriques pour électrodes ECG - set de 6	260 073
Rouleau de papier pour CARDIOMATE EVI 10" (20m x 216mm)	260 061
Adaptateurs bouton pression (x10) pour CARDIOMATE EVI 7 & 10"	260 023
Adaptateur secteur pour CARDIOMATE EVI 7 & 10"	260 053

LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

La tablette EVI est un dispositif de classe médicale IIa et répond aux exigences européennes en vigueur de la directive 93/42/EEC.

Centre de support technique

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels. Rendez-vous sur le site Spengler dans la rubrique Contact.

Garantie Spengler

Le Cardiomate EVI est garanti dans les conditions normales d'utilisation (entre 3 et 5 ans selon la tablette). La garantie ne couvre pas les pièces d'usure, les chocs et les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



www.spengler.fr

Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

www.spengler.fr